

MANUAL UTILIZARE

**Aparat de Masaj si Incalzire pentru
Picioare, Presoterapie, Drenaj Limfatic,
cu compresie de aer**



Presoterapia consta in masajul pneumatic realizat prin compresia si decompresia controlata a camerelor de aer. Presomasajul imbunatateste semnificativ circulatia sangvina si totodata, previne aparitia alterarilor circulatorii si favorizeaza starea de bine.

ATENTIE!

A nu se folosi în apă.

Nu utilizați într-un loc cu umiditate ridicată, cum ar fi o baie. Nu expuneți unitatea principală sau cablurile la apă, ceea ce poate duce la defecțiune sau șoc electric.. Când îl scoateți, asigurați-vă că deconectați adaptorul de alimentare, în caz contrar se pot strica in timp.

Deconectați adaptorul de alimentare atunci când nu îl utilizați, altfel poate cauza șoc electric, scurgeri electrice sau incendiu din cauza alimentarii continuu a dispozitivului.

Detalii:

1 Ieșire: DC 12V/2A.

2.Starea de repaus: Sub 100UA 4. Temporizator: 10 minute.

3. Trei nivele de putere: slab, mediu, puternic

4. Două nivele cald: scăzut, ridicat,

5. Șase programe automate, frământare, masaj, relaxare, focalizare picior, picior faus

Poziția masajului: centrul piciorului, picior gol, talpa piciorului, coapsă.

Poziția compresei fierbinți: centrul piciorului (Sole heart).

6. Funcționare cu trei butoane: program, cald, oprit/intensitate

A. Program: automat, masaj, frământare, relaxare, focalizare picioare, focalizare picior.

B. Căldură scăzută ridicată, oprită.

C. Oprit/Intensitate masaj: apăsați lung pentru a porni/dezactiva, apăsați scurt pentru a allege intensitatea masajului inclusiv slab, mediu, puternic.

7. Toate LED-urile sunt aprinse timp de 1 secundă când pornește

Timp de masaj (std.): 10 minute, zilnic (stimularea excesivă a mușchilor și nervilor va avea un efect opus dacă este utilizată o perioadă lungă de timp).

-Butonul pentru pornire/oprire.

-Toate butoanele se vor aprinde


Produsul va începe aprox. 5 secunde după pornire, oprire automată după 10 minute. (deși schimbați programul între timp, acesta se va opri după 10 minute.)


- Recomandați ca intensitatea să înceapă de la „slab.

Schimbați programul

Programul se va schimba conform secvenței de mai jos:

Auto >>> relaxare >>> masaj >>> framantare>>> vopsea picioare>> vopsea picioare

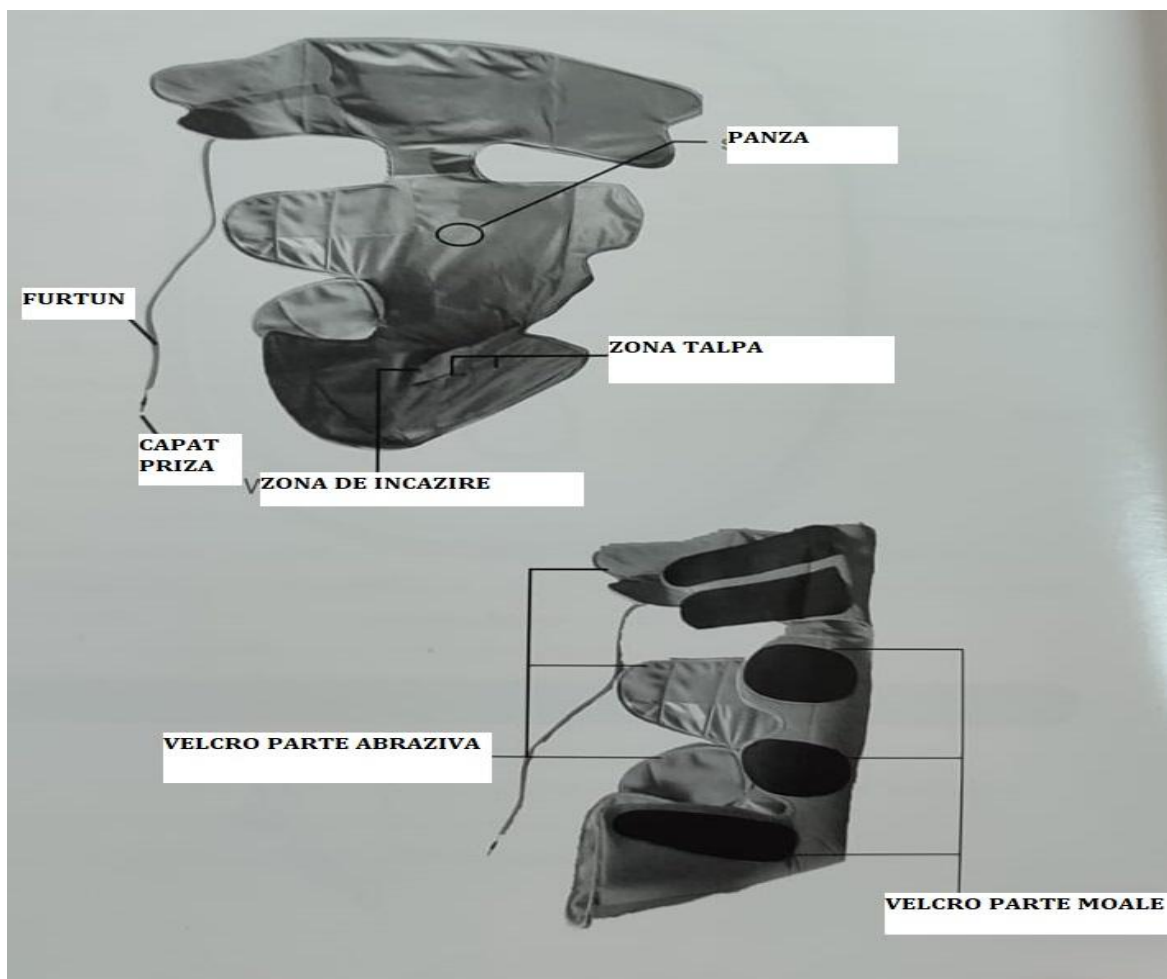

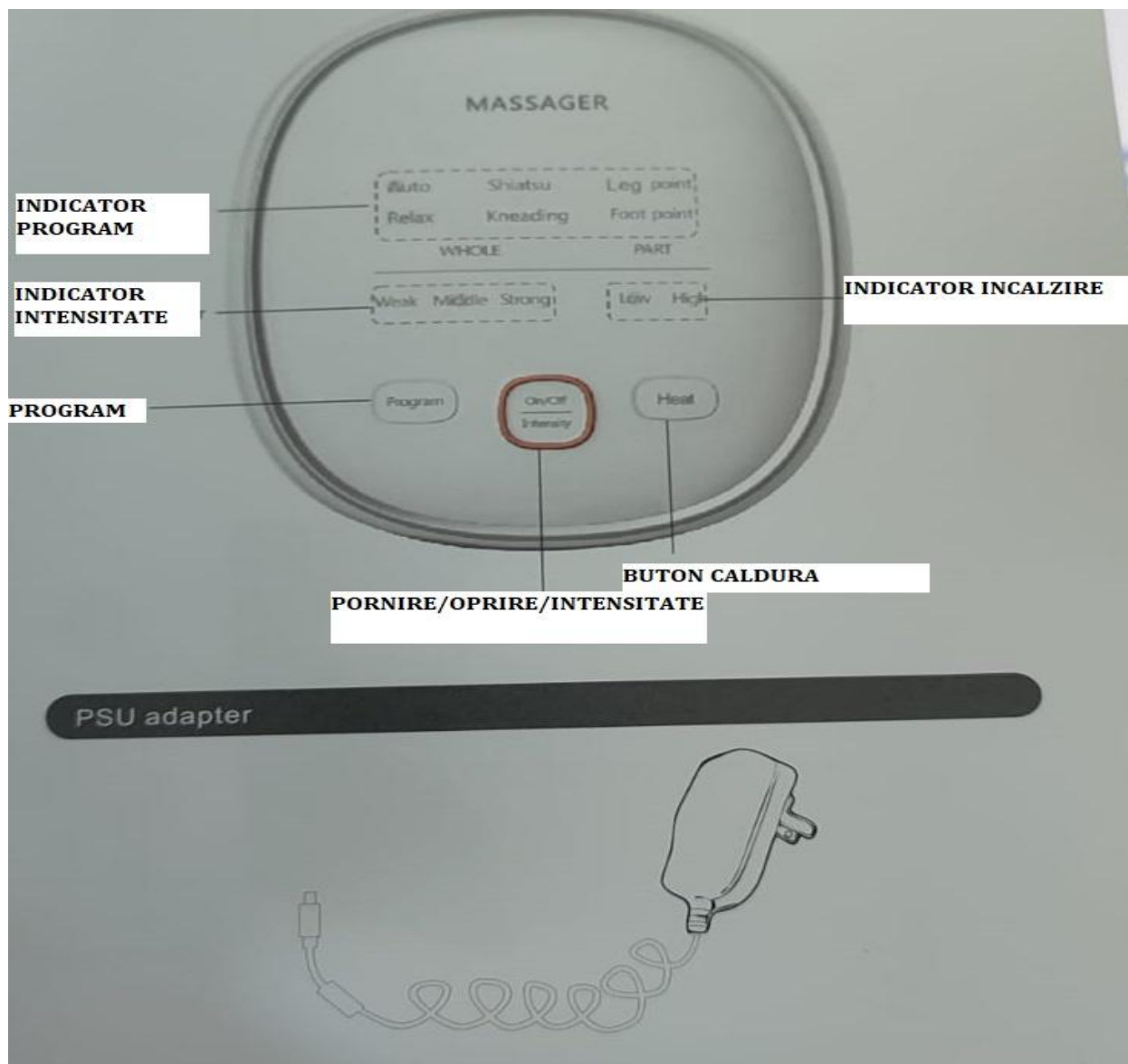

INDICATII:

1. Conectați-vă la adaptor
2. Înfășurați până la picior velurul, înfășurați de sus pana jos
- 3 . Apăsați velcro și fixați-l suficient de mult, pozitionati corect conform indicatii furtun, R- DREPT, L- STANG

Intensitate slabă- înfășurare în masaj ușor

Uneori, sistemul se poate desprinde daca sunteti imbracat cu leggings, sau imbracaminte alunecoasa.

Conectați panoul central

Mod utilizare



Asigurați-vă ca atât picioarele cât și talpile sunt bine strânse cu foliile reglabile



Conectați cablul la controler



Apasați lung butonul de pornire



Apasați butonul **Program** pentru selectarea tipului de masaj



Apasați butonul **On/Off** pentru a selecta intensitatea presiunii aerului



Apasați butonul **Heat** pentru a ajusta temperatura

Depozitare și colectare;

- Vă rugăm să vă asigurați că produsul este „off” - oprit.

1 scoateți adaptorul, mufa, mufa tubului de aer

2 Fixați suprafața velcro

3 Îndoți ușor tubul de aer și puneți-l în foliile de masaj pentru picioare



Nu trageți puternic de tubul de aer când trageți în jos ștecherul.


Prudență!

Nu înfășurați cablul la panoul de comandă sau adaptorul în timpul depozitării. Nu pliați tubul de aer sau înfășurarea la chit, altfel, se va supraîncărca cablul PSU și tubul de aer, apoi se va produce fractură, scurtcircuit cablu, provocând incendiu și electricitate.

Depozitare

Nu îl lăsați la îndemana copiilor!.

- Nu îl amplasați la temperaturi ridicate, umiditate ridicată sau lumina directă a soarelui.
- Nu puneți nimic pe panoul de control și pe suprafața înfășurării. (În caz contrar, ar putea lăsa urme pe suprafață sau poate cauza culori încrucișate sau decolorare)

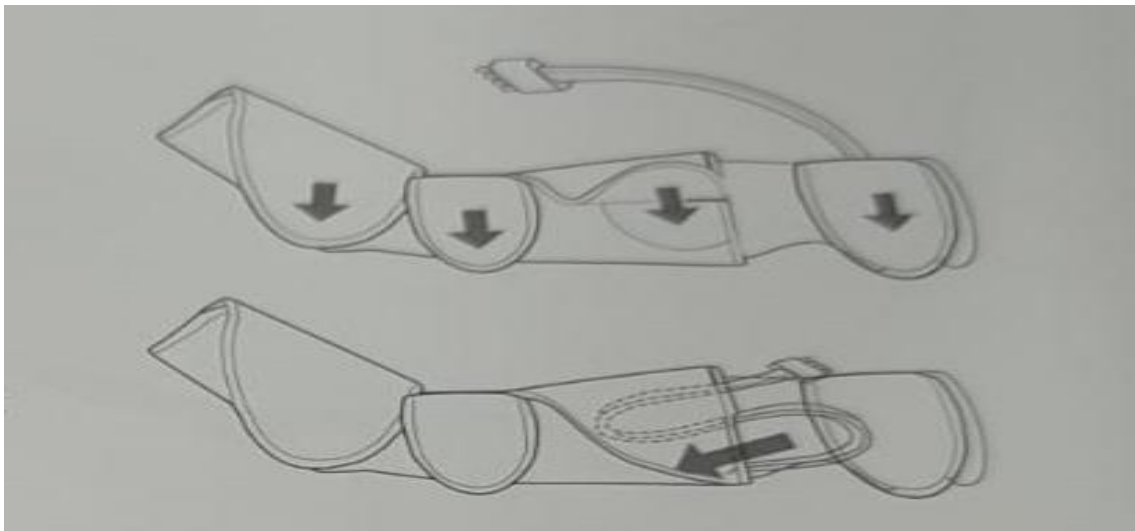

Can it be massaging another parts besides leg and foot ?

PICIOR

Dimensiunea picorului

de la talpa in sus- 770mm
calcai spre degete- 295mm

Intensitatea masajului este prea puternică

intensitate prea slabă

Velcro nu e reglat sau airbagul nu este ajustat

Reglați Velcro sau airbag prea puternic pentru a fi slăbit.

Prea slab - reglați velcro sau airbag pentru a fi strâns

Intensitatea picioarelor și gambei prea slabă,

Vă rugăm să încercați să utilizați garnitura pentru picior și garnitură pentru gambe.

Reziduu de aer din chit

Puttee (airbag) are prea mult aer în interior, are nevoie de câteva minute pentru a elibera aer

Vă rugăm să scoateți orificiul de aer, acesta poate fi eliberat automat.

Conținut de substanțe nocive:

Nume	Substanțe dăunătoare					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Placă de circuit	×	○	○	○	○	○
Adaptor AC/cablu	×	○	○	○	○	○
Cablu	×	○	○	○	○	○
Controlor	×	○	○	○	○	○
Wrap/tub de aer	○	○	○	○	D	○
Material plastic	○	○	○	○	○	○