

MANUAL DE UTILIZARE

Aparat de Masaj portabil 3 in 1, cu incalzire si vacuum, display LCD, Tonifiere, Scraping massager, Indepartare celulita, Slabire



DESCRIERE:

Acest dispozitiv de masaj poate fi utilizat pentru cupping, compresa calda si masaj prin razuire, un aparat pentru trei utilizari, foarte convenabil. Poate imbunatati eficient promovarea metabolismului si curatarea meridianelor, imbunatatirea imunitatii. Prin masarea suprafetei pielii, o elibereaza de durere si permite corpului sa se detoxifice in acelasi timp.

Oferă o absorbție puternică a pielii și țesutului adipos pentru a activa funcția de detoxifiere a limfei și a îmbunătăți circulația sângelui.

Energie termică. Proliferează colagenul dermic prin efecte termice, relaxează nervii și eliberează presiunea prin furnizarea de căldură continuă

Terapia cu unde magnetice. Elimina inflamația și umflarea pentru a vă ușura oboseala corpului și pentru a promova recuperarea fizică.

Operare simplă. Acces rapid la controlul butoanelor și indicarea directă a afișajului pe panou, convenabil pentru a monitoriza starea de lucru și a porni/opri instantaneu, regla temperatura de încălzire sau nivelurile de intensitate a presiunii negative și setați timpul.

Prindere usoara. Mânerul ergonomic permite o ținere sigură chiar și după o utilizare îndelungată.

Aplicații multifuncționale. Poate fi utilizat pe scară largă pentru cupping, masaj, guasha, pierdere în greutate etc., ajutând eficient la modelarea gâtului, brațelor, picioarelor, spatelui, abdomenului și membrelor inferioare și superioare etc

Reglabil in trepte si temperaturi diferite, din care puteti alege, pentru a se potrivi diferitelor parti ale corpului. Potrivit pentru brate, abdomen, spate, coate, incheietura mainii, genunchi, glezne, picioare, coloana vertebrala si alte partiale corpului; dar nu este potrivit pentru cap, gat.

Efect de ardere a grasimii si ingrijirea pielii - acest dispozitiv portabil de slabire, indepartare a grasii, pe care il puteti folosi acasa. Are o serie de utilizari, cum ar fi arderea grasimilor, reducerea celulitei, eliminarea vergeturilor, tonifierea pielii, sculptarea corpului si masaj de fitness la domiciliu.

Terapia magnetic wave - Terapia cu unde magnetice elimina umflarea si durerea. Ceea ce ajuta la promovarea detoxifierii limfatice si a circulatiei sangelui, la eliminarea toxinelor prin circulatia limfatica si razuirea pielii.

Efectul de caldura - Adoptarea terapiei cu efect termic pentru a reduce presiunea pentru a imbunatati respiratia celulelor pielii este avantajoasa pentru transpiratia si

glandele sebacee, deoarece secretia glandelor creste lubrifierea si protectia pielii, inmoaie si umezeste pielea, reduce ridurile si creste elasticitatea pielii. si elimina oboseala, favorizeaza recuperarea fizica.

Avantajele produsului: Poate fi folosit acasă, usor de transport. Apăsăți cu un singur buton pentru a începe.



Instrucțiuni:

1. Contactati dispozitivul catre o baterie externa cu ajutorul cablului USB. **Bateria nu este inclusa in pachet.** Apăsăți lung butonul de pornire timp de aproximativ 1,5 secunde pentru a porni/opri (poate fi oprit doar după 15 minute).
2. După ce aparatul este actionat, funcția de aspirație/incalzire pornește automat, apăsăți scurt butonul de ON pentru a actiona funcția de dezumflare.
3. Tasta mod aspirare 1
 - 1) Apăsăți scurt tasta mod de aspirație 1 în starea de pornire pentru a comuta între diferite moduri de ventoză (modul implicit este starea M1 la pornire)
 - 2) Produsul are trei moduri de aspirare:
 - M1: modul de vitalitate
 - M2: mod liniștitor
 - M3: modul adâncime



ON/OFF



PUTERE DE
ASPIRARE



CONTROL AL
TEMPERATURII



ELIBERAREA
PRESIUNI/PAUZA



NUMARATOARE
20 MIN



Avantajele produsului:

Poate fi folosit acasă, ușor de transport. Apăsăți cu un singur buton pentru a începe.

Se recomandă utilizarea șervețelilor umede sau spray-ului pentru curățarea și hidratarea pielii pentru a spori senzația de utilizare.

CARACTERISTICI GENERALE

Zona corporala: Maini, Picioare, Abdomen, Spate

Tip Produs: Aparat anticelulitic

Tip utilizare: Uz casnic Semiprofesional Profesional

Destinat pentru: Masaj Tonifiere Vibromasaj

Greutate netă: 400 g

TOATE MODURILE DE APLICARE

Savureaza relaxarea oriunde si oricand



BRAT



ABDOMEN



TALIE



PICIOARE

Observatii

Se recomanda sa testati daca dispozitivul este adecvat pielii dvs. inainte de prima utilizare.

2. Cand actionati functia „cupping”, va rugam sa opriti „caldura” pentru a evita arsurile cauzate de febra prelungita intr-un singur loc.

3. După utilizare, vasele de sânge de pe suprafața pielii sunt dilatate. Trebuie acordat un timp de odihnă de 30-45 de minute înainte de baie.

Control temperatura:

Temperatura este setată implicit în 3 trepte. Lumina roșie din partea de jos este aprinsă, iar temperatura poate fi ajustată prin apăsare scurtă (DS-A21, DS-A22- 6 trepte, respectiv DS-A23 cu 12 trepte), viteza 0 nu are funcția de încălzire.

2. Când treapta DS-A23 ajunge la nivel 9, indicatorul de temperatură roșu începe să clipească și să lumineze. Cu cât viteza este mai mare cu atât indicatorul luminos de temperatură clipește mai repede.


3 Când temperatura este la nivel maxim, apăsați scurt pentru a opri această funcție (viteza 0), iar indicatorul luminos pentru temperatură se va opri.



Nivel de presiune:


Modul DS-A21 si DS-A22: in timpul procesului de cupping, daca se doreste oprirea acestuia, se apasa scurt pentru a intrerupe lucrul si a intra in modul de asteptare.

DS-A23: In timpul cuparii, daca doriti sa opriti sau sa indepartati produsul, apasati scurt aceasta tasta pentru a intrerupe cuparea.

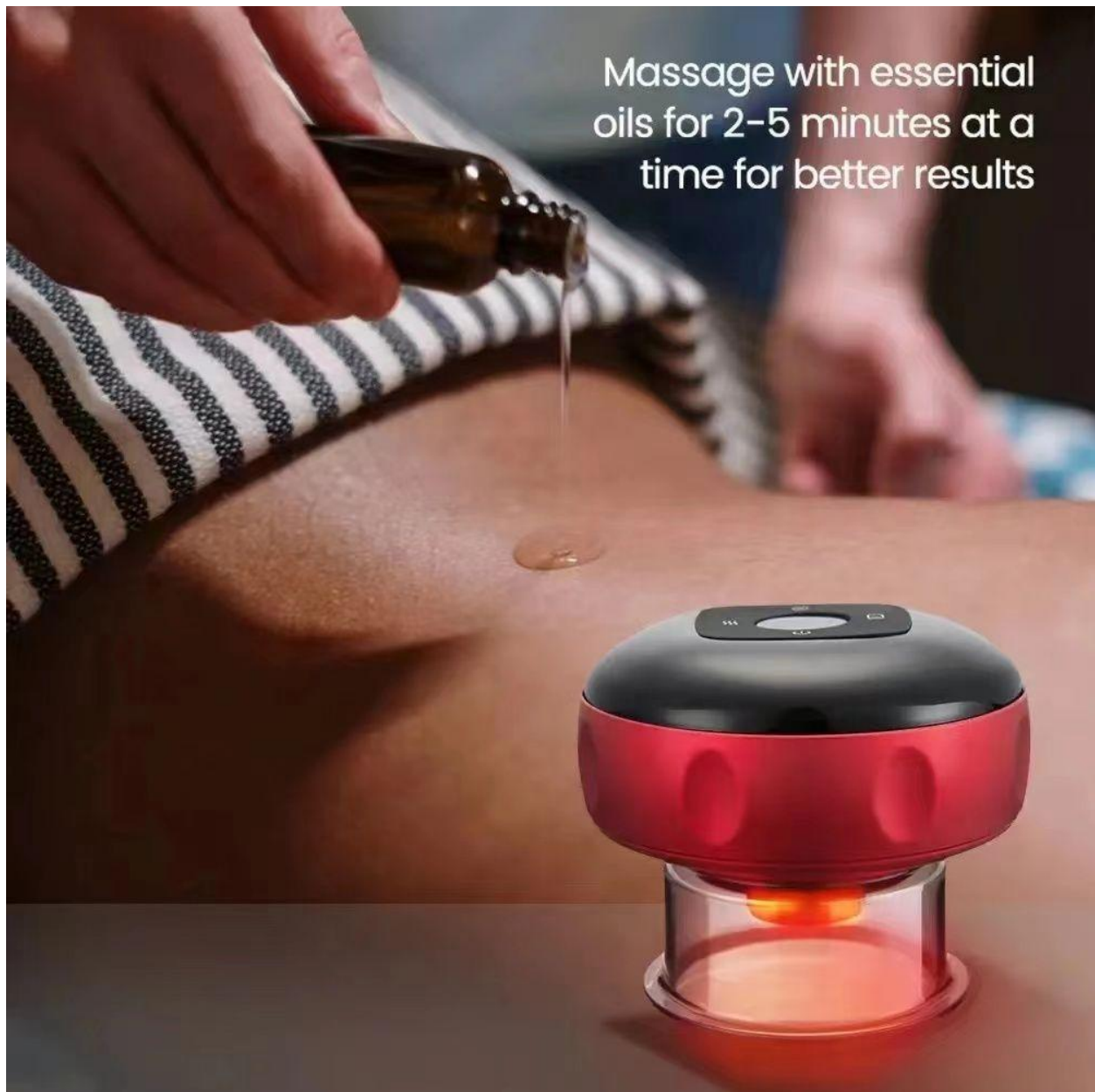

Cand utilizati acest aparat cu produse periferice lichide, cum ar fi uleiuri esentiale, va rugam sa aveti grija sa pastrati doar pe piele acest ulei. Daca suprafata pielii este acoperita uniform cu ulei si nu exista lichid evident, puteti utiliza aparatul.

Dispozitivul este proiectat cu un sistem de filtrare. Înlocuiți frecvent acel filtru de bumbac, pentru a preveni deterioarea aparatului.

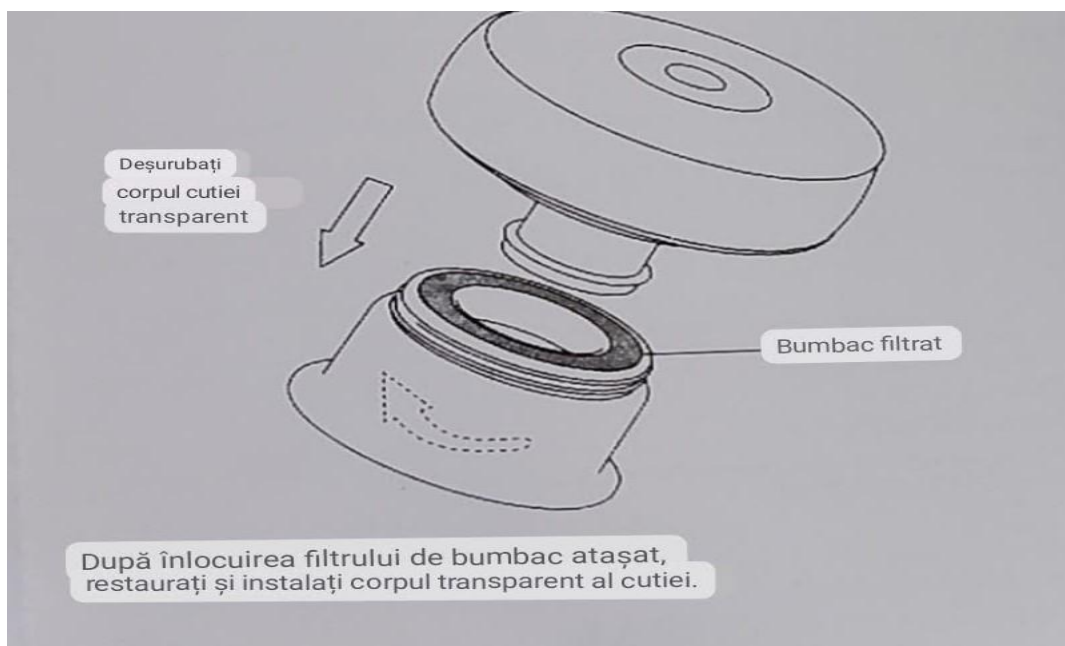

Precautii:

- Nu utilizati acest dispozitiv daca sunteti insarcinata, in cazul menstruatiei, escare sau rani la nivelul pielii, varice.
- Persoanele cu boli respiratorii, sau boli cornice (febra, piele sensibila sau boli critice)
- Pacienti cu boli circulatorii, tensiune, convulsii, anxietate, persoane cu alergii ale pielii.

Attentionari:

- Evitati utilizarea acestui dispozitiv pe zone cu cicatrici
- Cand se utilizeaza produsul, suprafata pielii se va inrosii sau incalzii, acest lucru fiind normal. Dupa utilizare, este recomandat sa asteptati cel putin 45 minute inainte sa faceti baie. Vasele de sange de pe suprafata pielii, unde ati utilizat produsul, sunt dilatate, de aceea e nevoie de acest timp de odihna.

Mod de intretinere:

- Stergeti dispozitivul cu o carpa uscata. Nu utilizati produse pe baza de alcool, diluante, sau acetone.
- Dupa fiecare utilizare, opriti dispozitivul si stergeti-l cu o carpa uscata.
- Depozitati aparatul intr-un loc uscat
- Nu utilizati dispozitivul pe lichide actionand sistemul de absorbtie.

Identificare problema:

Aspiratie slaba	- Indepartati rezervorul transparent si strangeti din nou
	-Verificati daca orificiile de evacuare a aerului sunt blocate
	- Verificati daca filtrul de bumbac trebuie inlocui
Temperatura slaba	-Verificati daca bacteria este descarcata
aprins	-Verificati daca indicatorul luminous pentru temperature este