

MANUAL UTILIZARE

**Aparat de Masaj si Incalzire pentru Picioare,
Presoterapie, Drenaj Limfatic, cu compresie
de aer**



1. Pregătirea echipamentului

- **Verificați echipamentul:** Asigurați-vă că toate componentele sistemului de drenaj cu compresie de aer sunt prezente și în stare bună.
- **Instrucțiuni producător:** Citiți manualul de utilizare oferit de producător pentru a înțelege specificațiile și recomandările acestuia.

2. Conectarea sistemului

- **Conectarea tubulaturii:** Conectați tubulatura de drenaj la sistem, asigurându-vă că toate racordurile sunt bine strânse pentru a preveni aerul să iasă.

3. Setări inițiale

- **Presiunea aerului:** Reglați presiunea aerului conform recomandărilor producătorului. Aceasta poate varia în funcție de modelul echipamentului și de necesitățile specifice ale aplicației.
- **Testarea:** Porniți compresorul și verificați funcționarea sistemului. Asigurați-vă că aerul circulă corespunzător și că drenajul funcționează eficient.

4. Utilizare și întreținere

- **Monitorizare:** Verificați periodic funcționarea sistemului pentru a detecta eventualele probleme. Asigurați-vă că compresorul funcționează corect și că nu există blocaje în tubulatură.

Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul și să păstrați acest ghid pentru referință. Acest produs este destinat numai pentru uz casnic.

Măsuri de siguranță

Nu utilizați un voltaj peste cerințele acestui produs.

Nu încercați să reparați sau să demontați produsul.

Nu utilizați produsul într-un loc în care se poate uda sau umed. Dacă unitatea se udă, opriți imediat utilizarea produsului. Dacă vă simțiți inconfortabil sau apar orice anomalie, opriți utilizarea acestuia.

Nu utilizați acest produs într-un mediu cu temperatură ridicată.


Nu utilizați acest produs dacă sunteți în prezent însărcinată sau menstruați.

Nu așezați unitatea într-un loc în care ar putea intra în contact cu obiecte inflamabile, obiecte explozive sau substanțe chimice.

Nu atingeți unitatea cu niciun obiect ascuțit, riscați deteriorarea.

Nu utilizați acest produs dacă oricare dintre situațiile de mai jos vi se aplică:

- Pielea este infectată, umflată, arsă sau afectată în alt mod.
- Aveți un stimulator cardiac sau alt implant medical.
- Suferiți de boli de inimă.
- Oasele tale sunt fragile sau rănite. Suferi de cancer.
- Urmăriți tratament sau tensiunea arterială nu este normală.
- Suferiți de osteoporoză

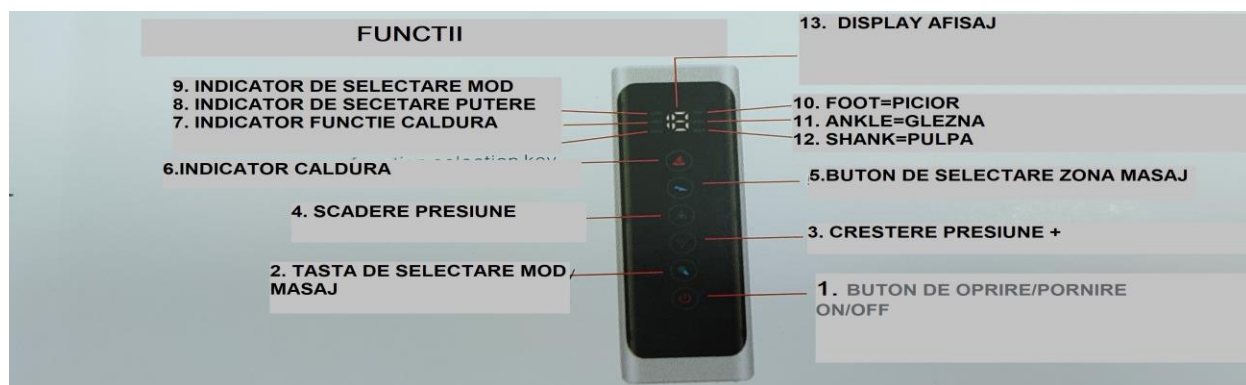

1. Conectați adaptorul de alimentare (orificiul de alimentare este cel mai de jos orificiu pentru priza CD), toate butoanele de funcție sunt albe.
2. Faceți clic pe comutatorul de pornire 1 al unității principale și toate butoanele de funcție sunt albastre, unitatea principală intră în modul de masaj inteligent, apoi faceți clic pe unitatea principală pentru a opri unitatea principală și a deveni alb.
3. Faceți clic pe butonul de selectare a modului de masaj 2, modurile corespunzătoare 1, 2 și 3 sunt afișate în caseta indicator 13 și ciclul de clic pe cele 3 moduri:
4. 3 și 4 sunt cheile pentru reglarea presiunii forței masajului, de 3 niveluri, care pot fi ajustate doar într-o direcție, iar nivelul corespunzător este afișat în caseta cu 13 numere în timpul ajustării.
5. Faceți clic pe butonul de selecție a părții de masaj 5 pentru a comuta între picioare, gambe și pulpa . Faceți clic pe butonul de selectare a modului de masaj 2 pentru a ieși din selecția părții de masaj și a intra în modul picior complet.
6. Faceți clic pe butonul de selectare a funcției de compresie la cald 6, faceți clic o dată pentru a introduce L-ul de grad scăzut, faceți clic din nou pentru a intra H de înaltă calitate și faceți clic din nou pentru a dezactiva funcția de compresie la cald, fișierul corespunzător.

Operațiune

1. Pozitionați pe fiecare picior, aparatul de masaj. Rețineți că fiecare este marcat cu L și R pentru fiecare picior (L-STTANGA. R- DREAPTA).
2. Folosiți partea cu Velcro, pentru a vă fixa strâns piciorul în aparat de masaj.
3. Mișcați piciorul pentru a vă asigura că aparatul de masaj este bine fixat.
4. Introduceți cele două conexiuni de presiune a aerului în controller
5. Apăsăți butonul de pornire, în timp ce este pornit LED-ul va rămâne aprins
6. Reglați puterea și modul presiunii aerului și puteți vedea operația dvs. pe ecranul LCD

NOTA: dispozitivul se va opri automat după 20 de minute. Pentru cele mai bune rezultate, nu utilizați aparatul de masaj pentru picioare mai mult de o oră.

pecificatii tehnice

Intrare: DC12V, 2A

Putere: 24W

Presiunea aerului: 180~375 mmHg

Material: țesătură tricotată

Culoare: Gri închis

Compresa fierbinte: 45°C, 55°C

Aplicație: Picioare, glezne, gambe, genunchi

Greutate produs (ambalat): 1,7 kg (2 kg)

Culoare: Gri