

MANUAL DE UTILIZARE

Mască vibrantă pentru ochi



Masca pentru ochi se potrivește conturului feței, blochează 100% lumina și are o zonă moale și fără presiune în jurul ochilor, pentru o purtare confortabilă, ajutându-te astfel să adormi mai repede. Masca portabilă pentru ochi de dormit este ergonomică și poate fi reglată corespunzător. Spațiul nasului cu design ergonomic ține masca lipită de față atunci când funcționează.

DUBLA FUNCTIE: masaj și compresie. Masca pentru ochi dispune de o compresă, punga ce poate fi introdusă la congelator pentru compresă rece, pentru a elimina edemul ochilor și pentru a întinde zona ochilor umflați, hidratează ochii și ameliorează ochii uși, oboși. De asemenea, masajul cu vibrații va va oferi o senzație de relaxare a ochilor. Efectul va fi mai bun dacă folosiți o cremă pentru zona ochilor.

MULTIFUNCTIONAL. Masajul pentru ochi are caracteristicile compresei calde, compresei reci, vibrații și măști de somn. Designul său 4 în 1 este benefic pentru îmbunătățirea ochilor uși, oboseală, umflare, blefarită, migrenă, pungi sub ochi, cearcăne, îmbunătățirea calității somnului.

În plus, punerea gelului refrigerat în mască de ochi 3D poate ameliora eficient umflarea dimineată, poate calma pungile de sub ochi.

Sfat: punga cu gel are nevoie de ~10 minute în congelator înainte de a fi scoasă pentru compresă rece.

RECE/CALD. Începeți cu 15 minute de compresie rece și vibrație, apoi 15 minute de compresie la cald și vibrații. Ochii vor fi pe deplin relaxați.

REGLABILA. Banda elastică reglabilă poate fi ajustată pentru a se potrivi cu diferite dimensiuni ale capului. Împărtășește-l cu familia sau prietenii.

DESIGN BATERIE MAGNETICA DETASABILA. Baterie magnetică detașabilă, design fără fir. Masca pentru ochi este alimentată prin USB și compatibilă cu prizele USB obișnuite de 5V/1-2A și poate fi alimentată de încărcătoare de perete, laptopuri, alimentare portabilă mobilă sau chiar încărcătoare de mașină. Indiferent dacă vă odihniți acasă, vă relaxați la birou sau în deplasare, îl puteți folosi oricând și oriunde pentru a elimina oboseala ochilor.

INSTRUCTIUNI

1. Atașați compartimentul de alimentare la masca pentru ochi conform direcției prezentate în figura de mai jos (1). După instalarea corectă. Indicatorul luminos de pe compartimentul de alimentare se va aprinde.(2)

(1)




(2)



Când indicatorul de alimentare este instalat corect, se va aprinde după fiecare apăsare de tastă pentru a afișa puterea curentă.

Se oprește automat după 5 secunde de iluminare continuă. Dacă instalați sursa de alimentare în 3 secunde după stingerea luminii, lumina nu se va aprinde.


În momentul în care dispozitivul este încărcat la maxim la priza, se cuplează la ochelari (de avut grijă ca prinderea să se realizeze corect, dispozitivul trebuie să facă un click atunci când este prins de ochelari, poziția corectă este cea orizontală cu ochelarii). După ce se cuplează corect, trebuie să țineți pe butonul ON/OFF, apăsat câteva secunde ca să pornească aparatul. Ulterior, va porni modul masaj și încălzire.

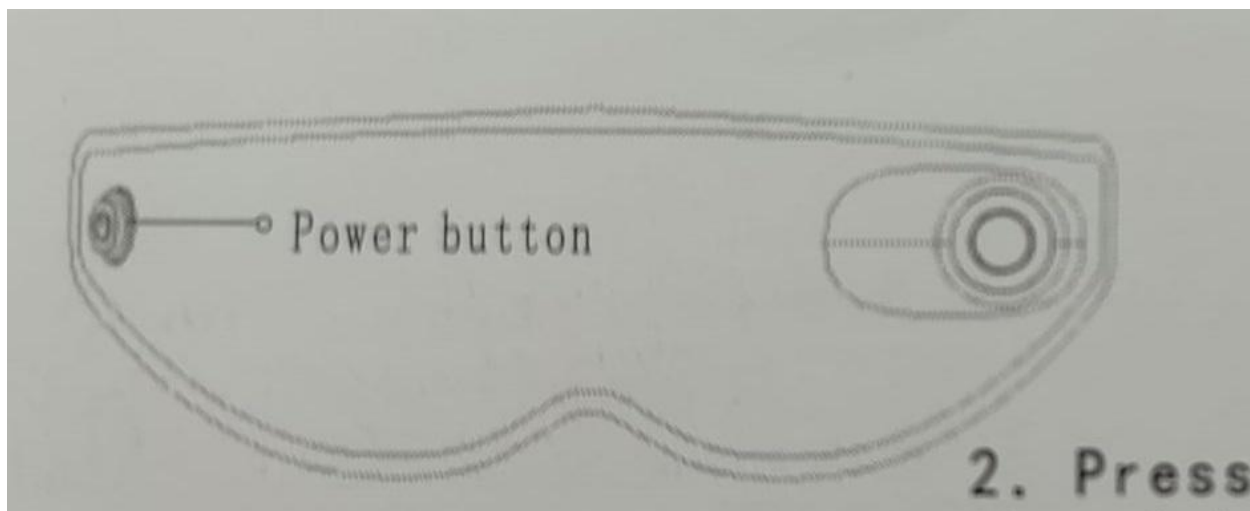

Butonul de pornire

1. Apăsați și mențineți apăsată tasta funcțională din partea dreaptă a măștii pentru ochi timp de 2 secunde. Când masca pentru ochi este pornită, corpul va vibra timp de 1 secundă.
2. Modul implicit de masaj de pornire (compresie fierbinte + vibrație), apăsați scurt butonul de alimentare în modul de masaj și comutați între modurile de compresie caldă (numai încălzire)." Fuzelajul va vibra de 2 ori.
3. Mod de masaj implicit după pornire. Apăsați scurt butonul de pornire pentru a comuta în modul compresie caldă



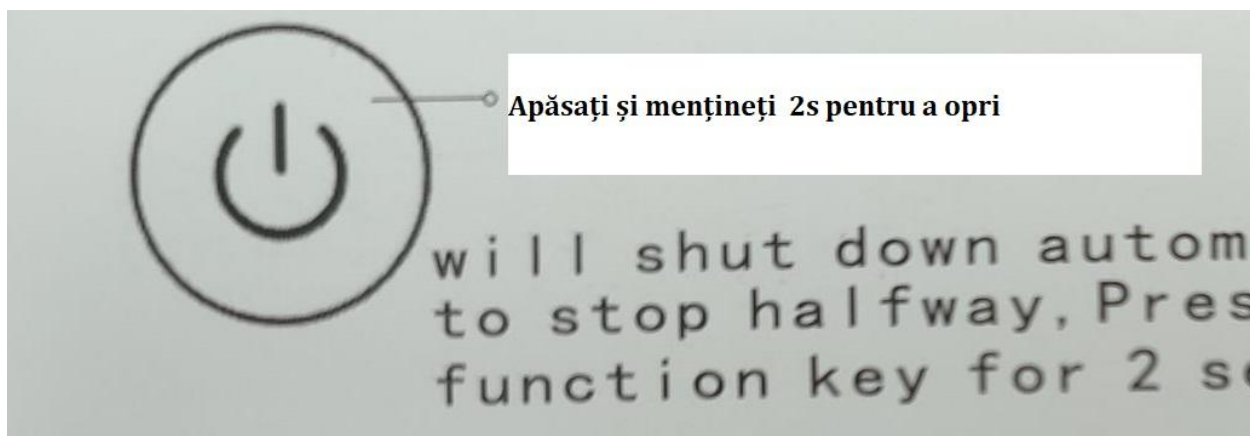

4. După 18 minute de funcționare în fiecare viteză, se va opri automat. Dacă trebuie să vă opriți la jumătate, apăsați și mențineți apăsată tasta funcțională timp de 2 secunde pentru a opri.
5. Dacă aveți nevoie de gheață, vă rugăm să puneți punga de gheață în frigider. Scoateți din camera frigorifică după 5 minute și puneți-o pe masca pentru ochi. Poate fi folosit în interior fără deschidere.



6. Când puterea bateriei este prea scăzută, compartimentul bateriei Indicatorul luminos va clipi continuu. Vă rugăm să scoateți compartimentul bateriei pentru încărcare pentru a asigura utilizarea normală a dispozitivului.

Sfat: După utilizare, vederea dumneavoastră va fi încetășată pentru o perioadă scurtă de timp. Ține-ți ochii închisi pentru un timp, vederea va reveni la normal în curând.

Notă: Produsul nu poate fi spălat cu apă. Este recomandat să folosiți o cârpă umedă curată pentru a șterge suprafața dispozitivului după fiecare utilizare.



MATERIAL RESPIRABIL. Tesăturile sunt respirabile. Este durabil și ușor de curățat. Masca pentru ochi este confectionata din material moale și confortabil, prietenos cu pielea, cu o respirabilitate excelentă. Cu designul tridimensional 3D, este ușor să creați un mediu confortabil de dormit si foarte confortabil de purtat, respirabil, pentru o îngrijire blândă a zonei delicate a ochilor.

SPECIFICATII

Material: poliester

Culoare: gri

Dimensiune: 24x12 cm

Greutate: 180g

Zona de masaj: ochi

Funcții: masaj prin vibrații, pentru ameliorarea presiunii din ochi, compresă caldă și rece

Denumire: Mască vibrantă pentru ochi, caldă sau rece, masaj pentru ochi, reîncărcabilă / Aparat masaj vibrator pentru ochi, relaxează și reduce tensiunea ochilor, cearcăne, pungi, ochi uscaci