

MANUAL DE UTILIZARE

**Aparat de masaj, presoterapie, drenaj Limfatic,
cu compresie de aer, multifuncțional, Digital, 6
camere, Negru**



Măsuri de siguranță

Nu utilizați voltaj peste cerințele acestui produs

Nu încercați să reparați sau să demontați produsul

Nu utilizați produsul într-un loc unde poate deveni umed. Dacă unitatea devine umedă, opriți imediat utilizarea produsului dacă vă simțiți inconfortabil sau apare orice neregula.

Nu utilizați acest produs într-un mediu cu temperatură ridicată.

Nu utilizați acest produs dacă sunteți în prezent însărcinată sau menstruați.

Nu așezați unitatea într-un loc unde ar putea intra în contact cu articole inflamabile sau substanțe chimice

Nu atingeți unitatea cu niciun obiect ascuțit și nu riscați deteriorarea. •


Nu utilizați acest produs dacă vi se aplică oricare dintre următoarele: rani, rani deschise, epiderma umflata.

Ai un stimulator cardiac sau alt implant medical

Suferiți de boli de inimă.

Oasele tale sunt fragile sau rănite. Suferi de cancer.

Urmăriți tratament sau tensiunea arterială nu este normală

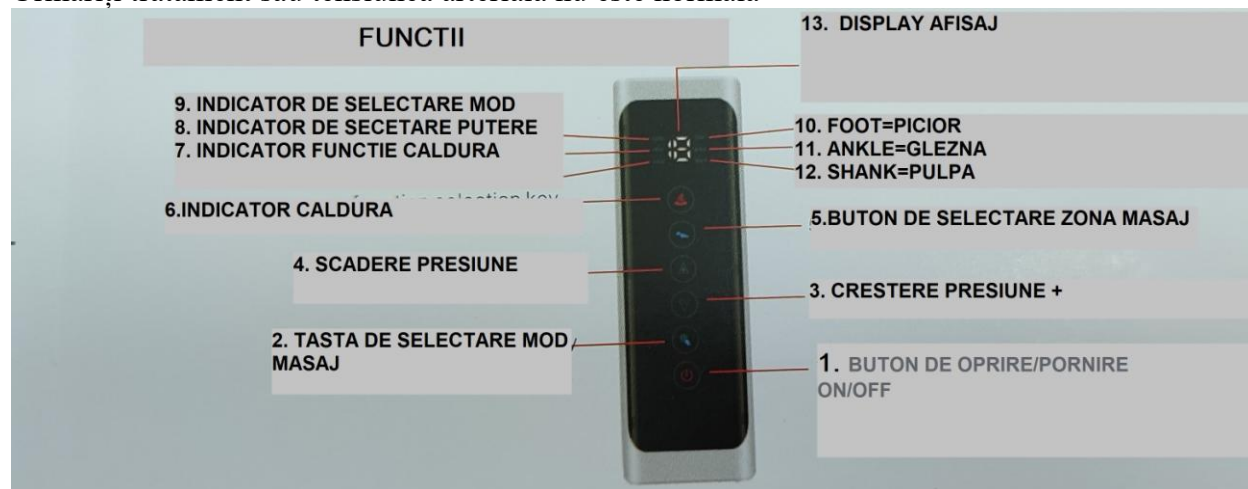

DESCRIEREA

1. Tasta de pornire/oprire, ON/OFF

2 Tasta de selectare a modului de masaj

3. Cheie de creștere a presiunii aerului

4. Tasta de scădere a presiunii aerului

5. Buton de selectare a zonei de masaj

6. Tasta de selectare a funcției de compresie la cald

7. Indicator de funcție de compresie la cald

8. Indicator de reglare a puterii

9 Indicator de selecție a modului:

10. Indicator de masaj al picioarelor

11. Indicator de masaj gambei

12. Indicator de masaj a coapsei

13. Presiunea aerului, masaj efectuat.

INSTRUCTIUNI

1. Conectați adaptorul de alimentare (orificiul de alimentare este cel mai jos orificiu pentru priza), toate butoanele de funcție sunt verzi
2. Faceți clic pe comutatorul de pornire al unității principale ON/OFF și toate butoanele de funcție sunt albe, unitatea principală intră în sistemul inteligent modul de masaj.
3. Faceți clic pe butonul de selectare a modului de masaj (buton 2 conf indicațiilor de mai sus) modulele corespunzătoare 1, 2 și 3 sunt afișate în caseta indicator 13.
4. Butoanele 3 și 4 sunt indicatori pentru reglarea presiunii forței masajului. Apasati pe PRESURE +, pentru crestere presiune pana la 3, apasati Presure -, pentru a scade presiunea.
5. Faceți clic pe butonul de selecție a părții de masaj (buton 5) pentru a alege zona unde vreți sa faceti masaj prin presiune. Indicator FOOT (PICIOR – LABA PICIORULUI, ANKLE- GLEZNA, SHANK- PULPA SUS (indicatoare 10, 11 și 12). Presiunea va fi directionata separat pentru fiecare din zonele selectate. Pentru zona picior, glezna, pulpa, se va umfla separat zona cu aer, ulterior pentru zona genunchi, se apasa pe butonul HEAT si se umple cu aer cald si zona genunchilor.
Afișaj, faceți clic pe butonul de selectare a modului de masaj 2 pentru a ieși din selecția părții de masaj și a intra în modul picior complet;
6. Faceți clic pe butonul de selectare a funcției de compresie la cald. Faceți clic o dată cu selectie L-left-picior stang, de grad scăzut (1, si se poate creste), faceți clic din nou pentru a introduce R de grad înalt și faceți clic din nou pentru a dezactiva funcția de compresare la cald,

Operațiune

1. Poziționează fiecare manson pe piciorul corect. Rețineți că fiecare este marcat L=stang și R-drept pentru fiecare picior,
2. Desfaceți cu ușurință fermoarul pentru a poziționa mansonul masaj.
3. Mișcați piciorul pentru a vă asigura că aparatul de masaj este bine fixat.
4. Introduceți cele două conexiuni de presiune a aerului în controler.
5. Apăsăți butonul de pornire în timp ce este pornit, LED-ul va rămâne aprins.
6. Reglați puterea și modul presiunii aerului și puteți vedea operarea dvs. pe ecranul LCD

NOTĂ: dispozitivul se va opri automat după 20 de minute.


Pentru cele mai bune rezultate, nu utilizați aparatul de masaj pentru picioare mai mult de o oră.

Îngrijire și întreținere

Păstrați produsul într-un loc uscat, ferit de umiditate și lumina directă a soarelui.


- Ștergeți cu un prosop uscat.

Funcția de terapie intensivă

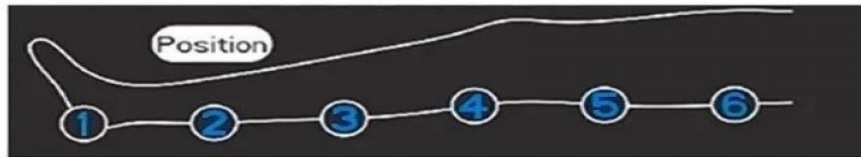


Cele șase camere pot fi pornite și oprite, astfel încât este posibil să se optimizeze tratamentul pentru mușchi sau zone specifice și să se aleagă câmpuri pentru a evita închiderea plăgii sau alte daune care nu pot tolera tratamentul.

Luminile aprinse, toate camerele funcționează

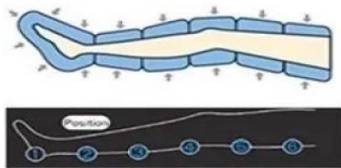

Luminile sunt oprite, camere cu aer sunt oprite

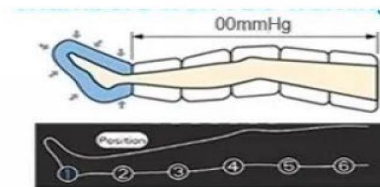

Apăsați pentru a închide camerele, dacă este nevoie de repornirea camerelor, apăsați din nou

Masaj de la camera 1 la camera 6 pe baza regulilor corpului uman.

*Fiecare cameră poate fi pornită sau oprită pe baza unui tratament specific

