

MANUAL DE UTILIZARE


Aparat de Masaj 3 în 1, talie, picioare, brațe, Presoterapie, Drenaj limfatic



Caracteristici

Prin airbag-uri multiplu, masaj regulat cu presiune, relaxează mușchii încordați și oferă suport picioarelor.

Funcționare inteligentă, intensitate reglabilă și operare ușoară

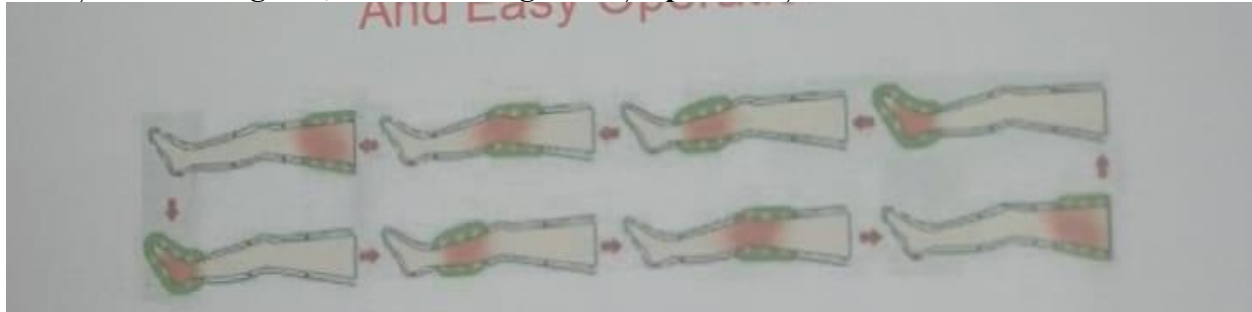

Specificații:

Intrare: AC110V-240V/50HZ-60HZ

Funcționare: DC12V. 2A

Putere: 20W

9 intensități, 4 moduri de masaj

Standard: GB4706.10-2008

Timp: 10 minute, 20 minute, 30 minute


Siguranța produsului


- 1. Nu utilizați aceeași mufă cu alt dispozitiv.**
- 2. Nu mai utilizați dacă nu vă simțiți bine în timpul utilizării.**
- 3. Nu utilizați un adaptor diferit de original.**
- 4. Nu dezamblați aparatul de masaj.**
- 5. Folosiți aparatul de masaj conform manualului.**

Utilizarea siguranței


1. Nu utilizați aparatul de masaj pe nicio altă parte a corpului care nu este menționată în manual.
2. Nu utilizați aparatul de masaj când utilizați un dispozitiv medical.
3. Vă rugăm să nu utilizați aparatul de masaj dacă aveți vreo boală gravă sau să consultați medicul înainte de utilizare.
4. Nu mai utilizați aparatul de masaj dacă vă simțiți inconfortabil sau observați vreo reacție a pielii.
5. Copiilor și persoanelor care nu pot identifica pericolul le este interzis să folosească aparatul de masaj și să nu fie la îndemâna lor.
6. Nu utilizați aparatul de masaj în baie, la temperaturi ridicate.
7. Nu utilizați aparatul de masaj când dormiți.

Acesta nu este un dispozitiv medical!!

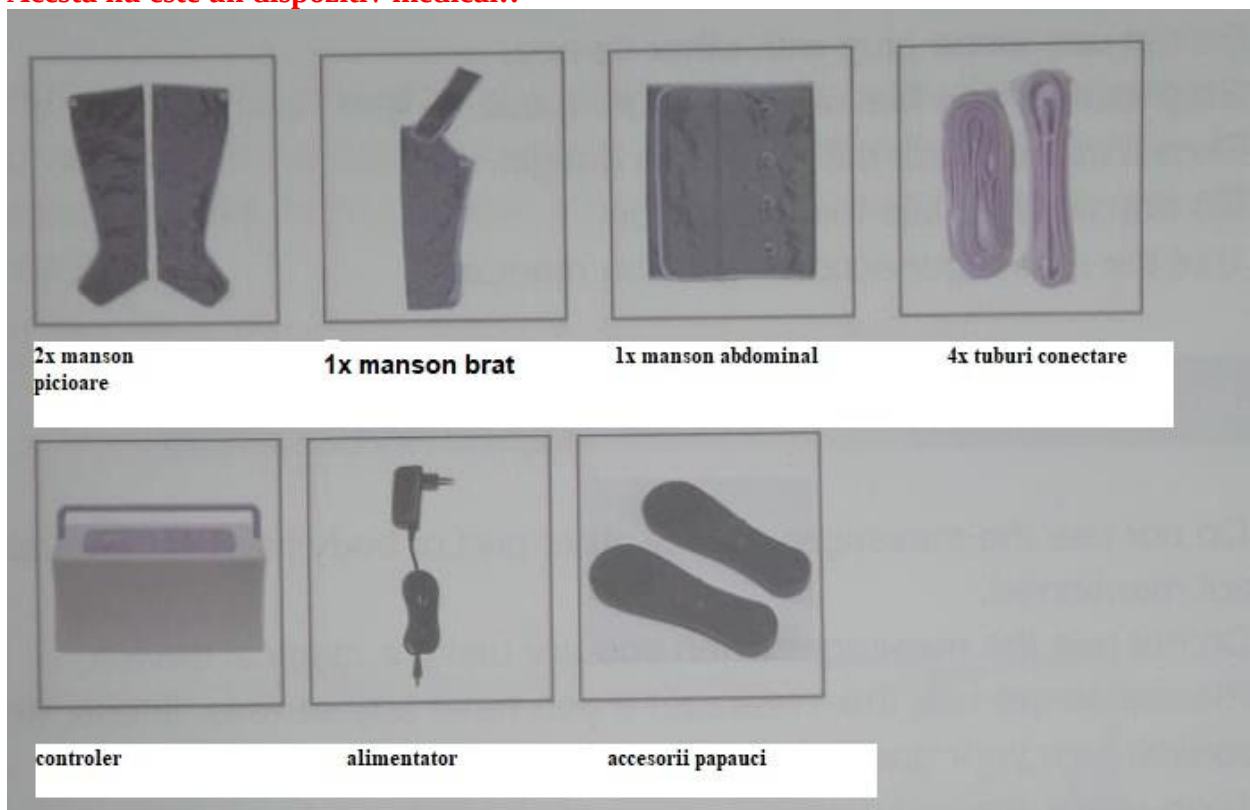

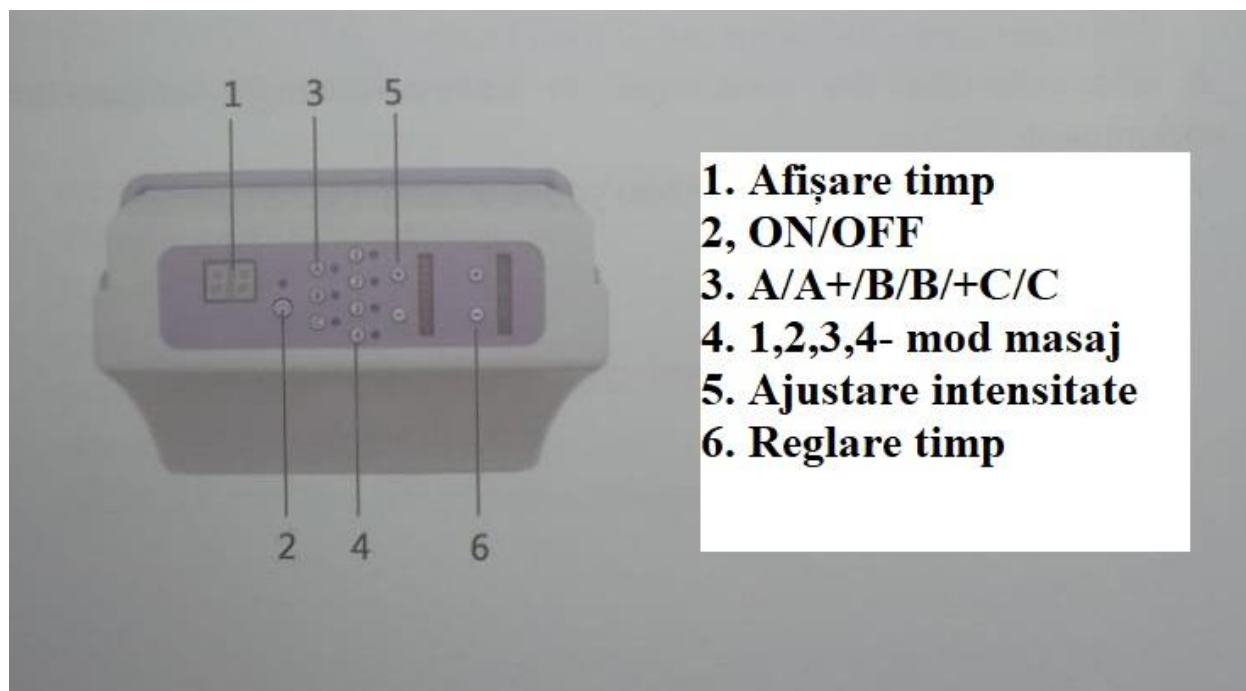


Asamblare

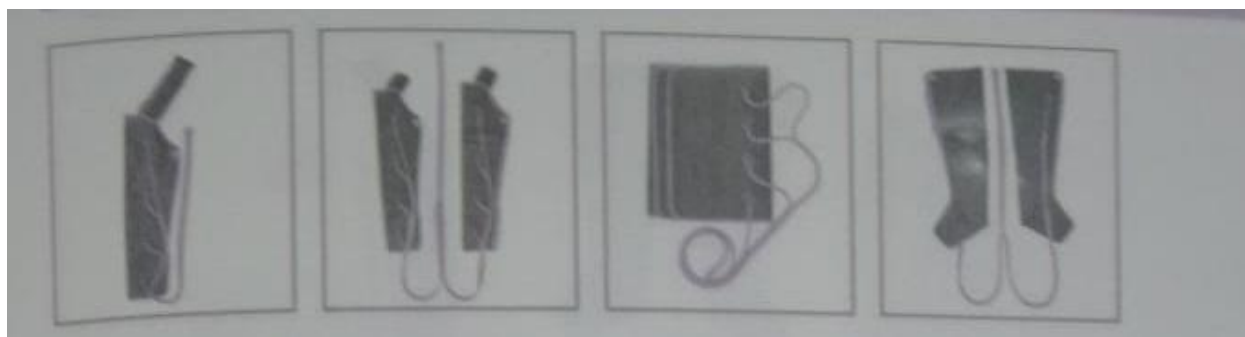

Conectați tuburile la mansoane, ca în imaginile de mai sus.

Conectați tubul de aer la controler ca imaginea de mai jos.

Conectați adaptorul la controler ca imaginea de mai jos.

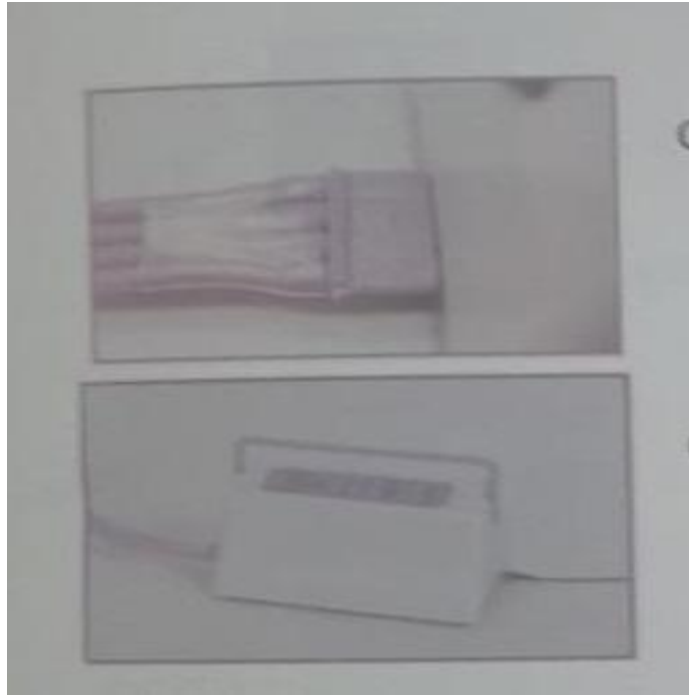

Funcții

Timp 3: 10 minute, 20 minute, 30 minute.

***9 intensități diferite.**

Când porniți intensitatea implicită a dispozitivului este 5, o puteți crește (+) sau micșora (-) cu +/- din stânga

LED-ul indică timpul până la oprirea automată a mașinii.

Când timpul implicit de pornire a mașinii este de 20 de minute, după 20 de minute aparatul se oprește automat. Puteți crește (+) sau micșora (-) timpul cu butonul din dreapta +/-.

Operațiune

1. Așezați aparatul de masaj în partea corespunzătoare a corpului.
2. Conectați corect tuburile de aer și cizmele.
3. Conectați corect adaptorul și controlerul.
4. Asigurați-vă că tuburile de aer netede pot funcționa corect.

Funcționare în 4 moduri de masaj:

A: Toate luminile sunt aprinse, 1, 2, 3, 4 sunt umflate în succesiune.

A+: Toate luminile clipească, 1, 2, 3, 4 se umflă în secvență, puteți opri pe oricare sau le puteți reporni din nou.

B: Toate luminile sunt aprinse, 1, 2, 3, 4 umflați împreună, continuați să strângeți și să dezumflați.

B+ Toate luminile clipească, 1, 2, 3, 4 se umflă împreună, continuă să strângeți până când opriți aparatul sau treceți la alte moduri.

C: Toate luminile sunt aprinse. 1. 2. 3. 4 umflați împreună, umflați rapid și dezumflați de 3 ori, apoi 1, 2, 3, 4 dezumflați împreună.

C: Toate luminile clipească, 1, 2, 3, 4 se umflă împreună, se umflă și se dezumflă rapid până când opriți mașina sau comutați la alte moduri

Observație: Dublu clic A/B/C poate comuta la modul A+B+/C+.

6. Puteți crește + sau micșora puterea în fiecare mod.

7. Când utilizați numai abdomen, vă rugăm să ajustați intensitatea de la nivelul 1 la nivelul dvs. de confort, nu sugerați mai mult de nivelul 3

