

MANUAL UTILIZARE

**Aparat fizioterapie TENS, 15 intensități, 8
moduri de masaj, Ecran LCD, terapie cu
încălzire și electrostimulare**



Electroterapie: Aparatul transferă electricitatea regulată într-un impuls electric sigur și eficient pentru a genera organismului o serie de efecte fiziologice, cum ar fi atenuarea durerii, eliminarea umflăturilor, ameliorarea inflamației, desensibilizarea, etc. centura de termoterapie poate ioniza ionii de medicamente ai corpului pentru a realiza dubla eficacitate a electroterapiei și medicației.

Câmp electric biologic: aparatele, conectate cu tehnologia electronică și tehnologia bionică, sunt proiectate cu un câmp electric biologic similar cu corpul uman. Poate activa eficient celulele corpului, poate regla echilibrul dintre yin și yang al corpului, poate întări funcția metabolismului și poate îmbunătăți circulația sângelui în anumite părți.

● **Termoterapie cu infraroșu:** Aparatul poate emite unde de radiație în infraroșu îndepărtat de 36-60 °C cu lungimea de undă cuprinsă între 8-10,5 micrometri. Poate îmbunătăți circulația sângelui din anumite părți, poate îmbunătăți absorbția exsudației, poate elimina umflarea, relaxa tensiunea musculară și poate ușura durerile cauzate de multe cazuri.

● **Masaj:** Aparatul face ca circuitul electric de ieșire să simuleze semnalele de impuls ale diferitelor manipulări de masaj cu semnale de impuls ale diferitelor manipulări de masaj cu tehnica convertor. Poate face ca părțile de tratat să genereze schimbări ritmice pentru a îmbunătăți microcirculația, iar puterea și profunzimea sa sunt incomparabile pentru masajul obișnuit.

• **Pustulă pe talpă:** regiunea piciorului este „a doua inimă” a corpului și există 35 de zone de ecou în regiunea piciorului, care conectează organele vitale ale corpului. Principiul aparatului este, prin stimularea zonelor reflexe unice, să drageze canalele principale și colaterale, să îmbunătățească circulația qi-ului și a sângelui și să îmbunătățească imunitatea organismului, astfel încât să protejeze împotriva bolilor, să vindece bolile, să întărească corpul și prelungește viața.

Caracteristicile produsului

-Pe baza varietății de canale principale și colaterale ale corpului, sunt alese mai multe tipuri de unde biologice optimizate pentru a acționa asupra corpului cu tehnologia computerizată modernă pentru a drage canalele principale și colaterale, pentru a regla echilibrul yin și yang al corpului, pentru a activa circulația sângelui, pentru a disipa staza sângelui, pentru a susține energia sănătoasă și pentru a elimina suferința.

-Stimulează acupunctura și moxibustia MTC și diferitele moduri de masaj, batere, ciupire etc. pentru a relaxa mușchii și articulațiile, pentru a activa sângele, pentru a ameliora rapid oboseala și pentru a recupera funcțiile organismului.

-Combină terapia fizică și terapia cu medicamente împreună. Undele biologice alternante dintre cei doi electrozi pot dilata porii, ceea ce este avantajos pentru infiltrarea medicamentelor. Căldura în infraroșu radiată de curentul de tratament termic poate activa mișcarea termică a moleculelor de medicamente și ioniza ionii de medicamente și poate accelera infiltrarea ionilor

în focarul de infecție al corpului pentru a atinge scopul a medicamentelor. Are funcții duble și eficiență dublă.

-Modulare automată de frecvență joasă și intermediară. Modularea frecvenței joase și intermediare poate evita oboseala corpului uman cauzată de o singură frecvență, iar efectul curativ este mai persistent și mai stabil.


-**Distribuie tratamentul.** Aparatul are mai multe tipuri de ieșiri, două ieșiri de electroterapie, două ieșiri de termoterapie și se poate folosi pentru mai multe părți ale corpului sau două persoane folosesc același aparat în același timp. Există mai multe opțiuni pentru diferite părți sau boli ale corpului și se poate adopta un tratament în așteptare.

-**Performanță stabilă.** Design electric digital de înaltă tehnologie, este foarte sigur pentru performanța sa stabilă.

• **Multifuncțional.** Funcții variate, funcții variate, nu numai că pot vindeca boli comune, dar pot, de asemenea, să ia pentru îngrijirea sănătății fizice după conectarea utilizării cu set de cupe, papuci de masaj, electrod pentru sân, electrod de slăbit și masaj pentru îngrijirea ochilor.

Artrita reumatoidă, îmbătrânirea musculară, înțepenirea gâtului, boala coloanei cervicale. boală degenerativă a articulațiilor, hipertrofie lombară, tenosinovită etc. Tratament auxiliar al accidentului vascular cerebral hemiplegic, neurastenii, cefalee, rinite, varicozitate, amorțeală a mâinilor și picioarelor, entorse și alte boli



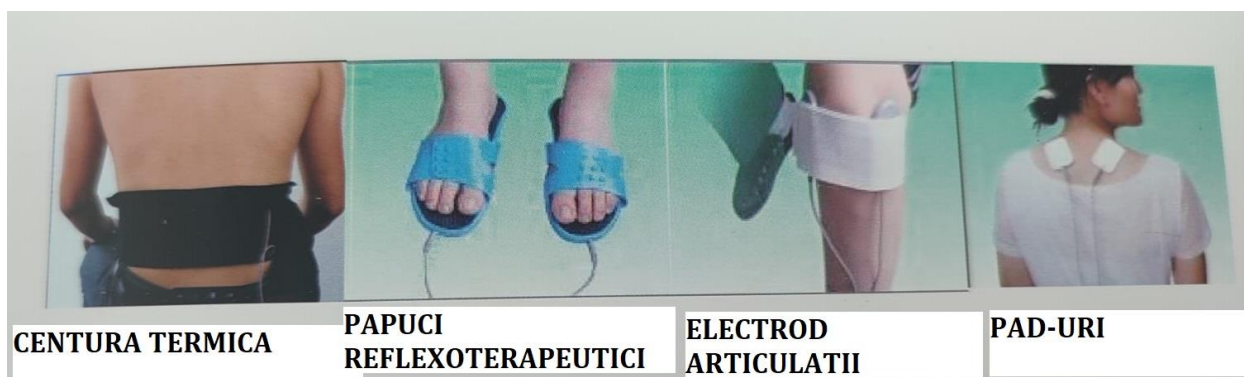

Pregătirea înainte de utilizare

•Pregătirea electrodului

Îndoțiți bumbacul absorbant în grosimea de aproximativ 1 cm și puneți-l în electrodul medicamentului (grosimea bumbacului absorbant nu trebuie să fie mai mică decât marginea electrodului), apoi umeziți bumbacul absorbant în mod egal cu lichior medical. Puneți doi electrozi pe partea afectată (încercați să faceți ca cei doi electrozi să fie simetrici cu partea de durere) sau punctele de acupunctură relevante și legați centura de termoterapie cu infraroșu. (Poate strânge electrodul medicamentului cu electrozi)

●**Pad cu electrozi**- Electrodul este un material consumabil, vă rugăm să dați în mod corespunzător. Este mai bine să-l păstrați la temperatura mediului ambiant între 10°C-+30°C.

Dacă forța de adeziv scade, spălați-o cu apă curată și forța de adeziv va fi restabilită după îndepărtarea murdăriei.

Scoateți foile de protecție înainte de utilizare, puneți foile de protecție curate pe suprafața plăcuței de electrod, pentru a preveni pierderea naturală a elementelor acestora și poluarea cu praf.

Utilizați alcool pentru a o dezinfecta.

Instrucțiuni utilizare

● Porniți alimentarea, lăsați ecranul să se afișeze.

• Apăsați tasta "TIMER" = TIMP, pentru alegere (30 minute, 20 minute sau 10 minute, stand)

Pentru tampon cu electrozi, electrod pentru medicamente, papuci de masaj și alte accesorii de electroterapie


-Conectarea accesoriilor la ieșirea de electroterapie cu doi pini, apoi alegeți modul de tratament din „Zona lombară”, „Spate”, „Articulații”, „Picioare”, „Degetul mare”, „Frământat”, „Masaj”,



„Automat”. Apăsați „-” sau „+” tasta („+” înseamnă creștere. „-” înseamnă scădere) pentru a regla intensitatea.

Dacă introduceți electroterapie unul  (Număr de la mâna stângă, a doua gaură), apăsați "I" pentru a regla intensitatea, dacă introduceți electroterapie două II  (Numărați de la mâna stângă, a treia gaură), apăsați „II” pentru a regla intensitatea.

Pentru centura de termoterapie cu infraroșu

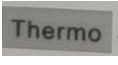Introduceți centura de termoterapie cu infraroșu în ieșirea de termoterapie (număr de la mâna stângă, prima sau a patra gaură, se afișează tasta ). Apasa  pentru a crește intensitatea sau  pentru a scăde intensitatea. Alegeți temperatura după cum are nevoie persoana.

La terminarea tratamentului, opriți alimentarea și scoateți din aparat.

Cum să alegi frecvența?

-Apasa  = FREQUENCY, puteți auzi frecvența joasă, frecvența medie și frecvența înaltă pentru alegerea dvs.

-Frecvența scăzută este doar pentru îngrijirea sănătății zilnice,

-Frecvența medie și frecvența înaltă este pentru a face unele tratamente.

DETALII PRODUS


COMANDA VOCALA
Nu mai trebuie să vă faceți griji cu privire la neînțelegere, funcția de ghidare vocală sincronă încorporată e un sistem pentru a ușura operarea chiar și de către persoanele în vârstă.


PAPUCI REFLEXOTERAPEUTICI
Produsul este echipat cu papuci de masaj pentru picioare, permițându-vă să masați punctele importante de la nivelul talpilor.


NIVEL DE INTENSITATE
Produsul este conceput cu un buton de reglare a intensității masajului, care poate fi reglat în funcție de senzația fiecărei persoane.



Observatii:

-În timpul tratamentului, nu lăsați mâinile să atingă accesoriile.

-Când se schimbă modurile de tratament, reglați intensitatea de ieșire la „0”, iar intensitatea de ieșire va fi resetată când este utilizată.

Părți de tratament și alegerea modurilor de tratament

-Părțile și modurile de tratament sunt setate pentru a alege în funcție de diferite părți ale corpului și boli. Semnale ale impulsurilor de tratament de diferite grade, respectiv, realizează acupunctura și moxibuziunea TCM și electroterapie moderne.

Detaliile sunt următoarele:

„Zona lombară”, „Spate”, „Articulații”, „Picioare”, „Degetul mare”, „Frământați”, „Masaj”, „Auto”

• Talie: Adaptiv pentru tratamentul bolilor din talia corp, cum ar fi încordarea mușchilor lombari, proeminența discului intervertebral lombar, entorsa spatelui etc.

Spate: Adaptiv pentru tratamentul bolilor din spate

Corp, cum ar fi amorțeala mâinilor și picioarelor, varicozitatea picioarelor etc.

Articulații: Adaptiv pentru tratamentul bolilor articulațiilor, cum ar fi artrita, artrita reumatoidă, afecțiunea retrogradă a articulației etc.

Picioare: Adaptiv pentru tratamentul legat de zonele de ecou ale talpii, precum hipertensiunea arterială, nevralgia, arterioscleroza, sindromul de tromboză cerebrală în perioada climaterică etc.

● Degetul mare: adaptiv pentru tratamentul fistulei și paraliziei.

● Frământați: au un efect curativ bun pentru diverse dureri (cum ar fi dureri de cap, dureri în talie și extremități inferioare, dureri în intestine și stomac etc.), insomnie, hipertensiune arterială, neurastenii etc.

Masaj: Adaptiv pentru slăbit, înfrumusețare facială, sănătate, îngrijire a sănătății și boli de grad scăzut.

Auto: Integrați eficiența multiplă a degetului mare, frământării, masajului, articulațiilor etc. și au funcții de tratament și îngrijire a sănătății pentru diferite boli acute și cronice adoptive pentru acupunctura și moxibustia MTC.

! În timpul tratamentului, nu atingeți cu mâna accesoriile dispozitivului.

! Atunci când sunt schimbate modulele de tratament, reglați intensitatea la „0”, apoi o resetăți în momentul utilizării.

Nu este adecvat următoarei categorii de persoane:

*Persoane suferind de afecțiuni cardiace severe.

*Persoane ce utilizează un pacemaker cardiac artificial, dispozitiv cardiac artificial, precum și dispozitive de reglare a ritmului cardiac.

*Femei în perioada menstruală sau în timpul sarcinii.

*Persoane cu febră ridicată sau cu tendința de sîngerare.

*Persoane suferinzi de tumori maligne.

*Răni sau părți ale corpului cu predispoziție la ulcer.

*Persoane cu afecțiuni hiperestezie (sensibilitate neobișnuită a pielii).



Precauții:

- Curățați partea afectată cu un prosop umed înainte de tratament și puneți electrozi pe partea de tratament după ce este puțin uscată. Dacă suprafața de electrodul este murdara, spălați-l cu apă curată și folosiți-l după ce este uscat.

Electrodul trebuie să atingă pielea în mod adecvat, pentru a îmbunătăți efectul curativ. După ce este folosit pentru o perioadă lungă de timp, aderența electrozilor poate deveni îmbătrânită și electrozii sunt ușor de alunecat Schimbați foile lipite (poate intra în contact cu vînzătorul) sau strângeți cu bandă elastică.

Cand pielea este uscată, poate umezi pielea cu un prosop pentru a îmbunătăți efectul curativ.

- Capacul centurii de termoterapie cu infraroșu poate fi scos pentru spălare dacă este murdar. Poate fi folosit după ce este uscat.

- Deoarece gradul de sensibilitate al părții afectate și al altor părți este diferit, poate apărea intensitate diferită pentru doi electrozi. În acest caz, mutați electrozii într-un alt punct de acupunctură sau schimbați locurile celor doi electrozi.

- Acționați cu atenție când foile lipite sau electrodul sunt îndepărtate.

Dacă echipamentul este utilizat aproape în medii cu unde scurte sau cu microunde (în interval de 1 M) sau este afectat de un câmp magnetic puternic, ieșirea este instabilă.

- Nu folosiți împreună echipamente medicale de înaltă frecvență și masaj terapeutic pentru a evita rănirea pielii sau deteriorarea masajului terapeutic.

Bumbacul de unică folosință și altele de unică folosință trebuie aruncate în coșul de gunoi după utilizare, pentru a evita poluarea mediului.

- Electrozii nu pot fi așezați pe ambele părți ale inimii în poziția din față și din spate.

Dacă vă simțiți inconfortabil când aparatul este folosit, nu îl mai utilizați.

Este mai bine să faceți cei doi electrozi aproape de punctele de acupunctură în perechi sau conform cerințelor. După tratament poate îmbunătăți circulația sângelui.

Se evită ca cei doi electrozi să se atingă direct, ceea ce poate deteriora aparatul.

Când mașina este operată, intensitatea puterii trebuie să crească de la mai jos la sus, pentru a evita inadaptabilitatea.

- Vă rugăm să nu utilizați acest aparat când pielea prezintă rani.

Pentru bolile de piele, persoana ar trebui să păstreze electrodul TENS pentru utilizare specială.

- Electrocul TENS trebuie evitat să fie pus pe partea laterală a zonei inimii. Dacă deci simți inima inconfortabilă.

Nu este potrivit pentru următoarele grupuri:

Pacientul suferă de o boală cardiacă severă.

- Pacientul folosește stimulator cardiac artificial, aparat cardiac artificial și dispozitive de reglare a ritmului cardiac.

