

MANUAL UTILIZARE

Aparat de masaj bioelectric DDS de joasă frecvență



Acest instrument combină în mod creativ cultura medicinei chineze antice cu fiziologia modernă. Folosește teoria meridianelor ca mecanism de stimulare a meridianelor cu energie electrică, astfel încât qi-ul și sângele corpului să fie deblocate, organismul, funcția imunitară să fie întărită și scopul de a condiționa și de a menține sănătatea.

Putere nominala de lucru: 30W

Intrare AC: 100-240V, 50Hz la ieșire DC 15V

Frecvența de ieșire: 3K Hz

Tensiune de ieșire fără sarcină: curent biologic slab 0-25,2 V

Putere de ieșire: 0-3mA

Intensitatea ieșirii: 0-99 fișiere

Mod de ieșire: 10 tipuri

Temperatura mediului ambiant: -5°C-50°C

Umiditate relativă: 20%-90% (fără condensare)

Instrucțiuni

1. Când utilizați acest instrument, puteți utiliza direct electroterapie cu potențial electric controlat de corp în funcție de fizicul și condiția dumneavoastră fizică. Operatorul controlează încet intensitatea curentului manual și masează direct partea care necesită terapie fizică, manual.
2. Recomandăm în general 1 luna ca curs de tratament (de 10 ori), adică o dată la 3 zile, fiecare timp de utilizare este de 30-90 de minute (timpul în faza timpurie de kinetoterapie este mai mare, iar timpul în faza ulterioară de recuperare este mai scurtă.) Primele 6 sedințe reprezintă etapa de kinetoterapie, iar ultimele 4 sedințe sunt etapa de recuperare..

Notă: Pentru utilizatorii începători, timpul de prima utilizare ar trebui să fie controlat în 15 minute!

3. Definiția dintre faza de kinetoterapie și faza de recuperare se bazează pe sentimentul propriu și îmbunătățirea condiției fizice a oaspetelui..

Curentul moderat este cel mai bun pentru utilizatorii începători

Precauții și contraindicații

Precauții

Dacă întâmpinați alte probleme în timpul utilizării, opriți mai întâi alimentarea;

2. Stai departe de persoanele fără capacitate de gândire sigură;
3. Creșteți treptat intensitatea în timpul utilizării, nu creșteți brusc;
4. A nu se utiliza după ce ai băut;
5. După folosirea acestui instrument pentru a opera, este interzis să bei apă rece în decurs de o oră, iar apa rece pentru a te spăla pe mâini și a face baie este interzisă.

Contraindicații

Pacienți cu funcții cardiace, pulmonare și renale sever slăbite.

2. Pacienți cu tumori maligne.
3. Pacienți cu boli infecțioase acute.
4. Perioada de sângerare a diferitelor boli hemoragice.
5. Femeilor însărcinate (sarcină, menstruație),
6. Există corpuri străine încorporate în corp precum metal, silicagel etc.).
7. Pacienți cu convalescență după intervenții chirurgicale pe inimă și boli cardiace organice severe.
8. Hipertensiune arterială severă (cei a căror tensiune arterială este mai mare de 160/110 mmHg).
9. Alți pacienți în stare critică.
10. Persoane cu alergii dermatice
11. Nu este potrivit să faci terapie fizică în decurs de o oră după masă.



**DISPOZITIV CU
VALIZĂ**



4x PAD TERMIC



2x PAD ELECTRIC



**MANUSI
ELECTROTERAPEUTICE**



CABLU




CABLU



ALIMENTATOR

DETALII CONTINUT

Portul de ieșire de control fizic introdus în mănuși.

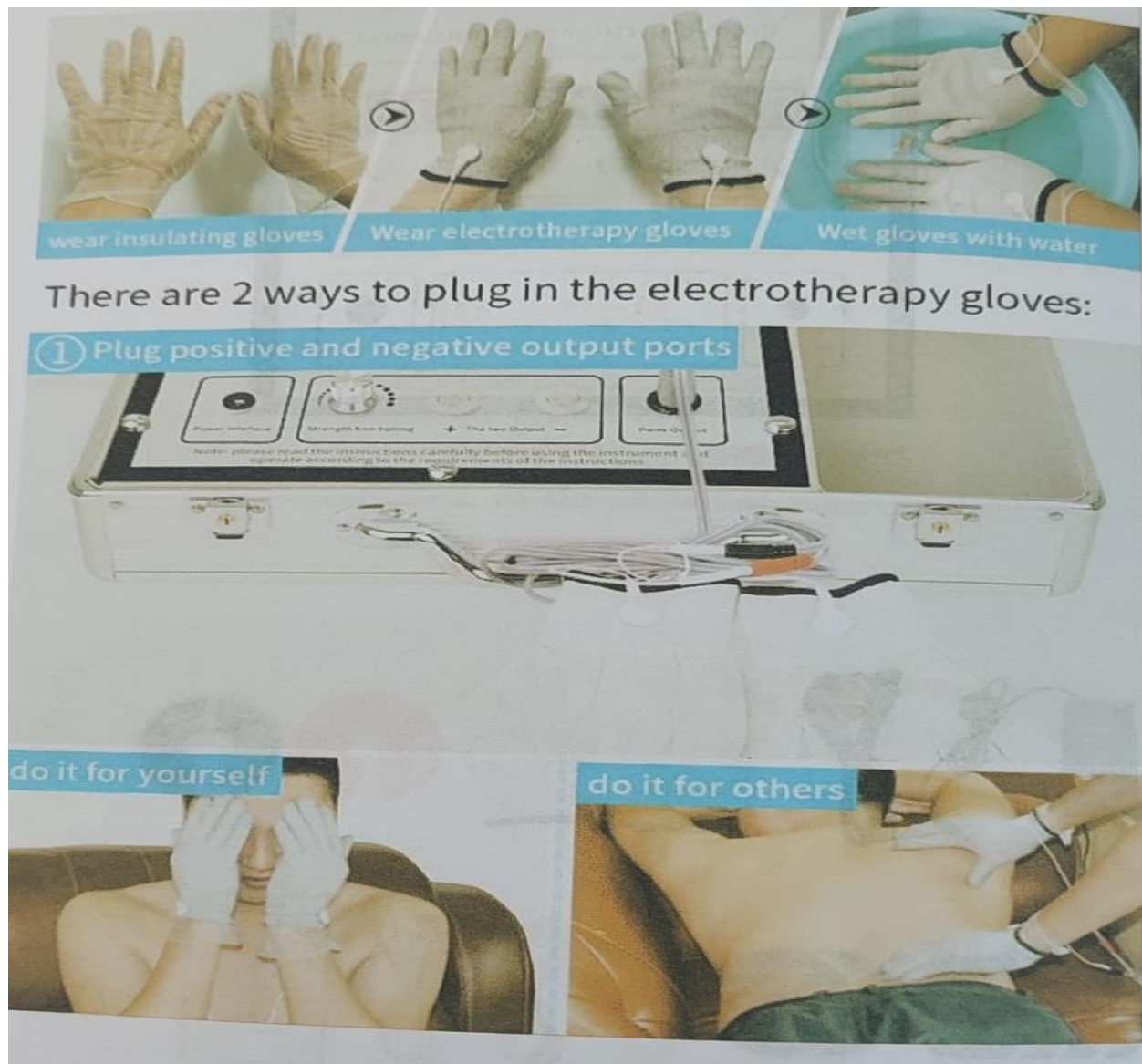

Modul de operare simplu și convenabil este după cum urmează:

Înainte de utilizare, mănușile trebuie să fie înmuiate cu apă sau emulsie de ulei esențial sau presate uscate (nu uitați să nu uscați), apoi purtați o pereche de mănuși de plastic izolatoare sau mănuși de latex și apoi folosiți mănuși de electroterapie pentru operare. (Folosiți mănuși pentru operare, vă rugăm să selectați modul 1)


Există două moduri de a introduce mănușile:

Primul tip: mănușile sunt introduse în portul de ieșire al accesoriilor. După ce porți mănușile, o poți face pentru tine sau pentru alții și o poți face direct. Nu este nevoie să legați electrozi pe corp.

Al doilea tip: mănușile sunt conectate la portul de ieșire pentru controlul corpului, un set de foi de electrozi sunt conectate la portul de ieșire „+ pol”, iar mănușile sunt conectate la portul de ieșire „pol” (polii pozitivi și negativi ai mănușile și firele mufei electrozului pot fi schimbate)

Pentru tine: Pernițele cu electrozi pot fi atașate de tălpile picioarelor, talie, fese sau zone care necesită terapie fizică, apoi purtați în mod corespunzător mănușile și ajustați intensitatea curentului în funcție de acceptarea personală.

*Faceți pentru alții: electrozile pot fi atașate de tălpi, talie, fese sau zone care necesită terapie fizică. Apoi, după ce electroterapeutul pune corect mănușile, reglați intensitatea curentului încet în funcție de acceptul clientului.

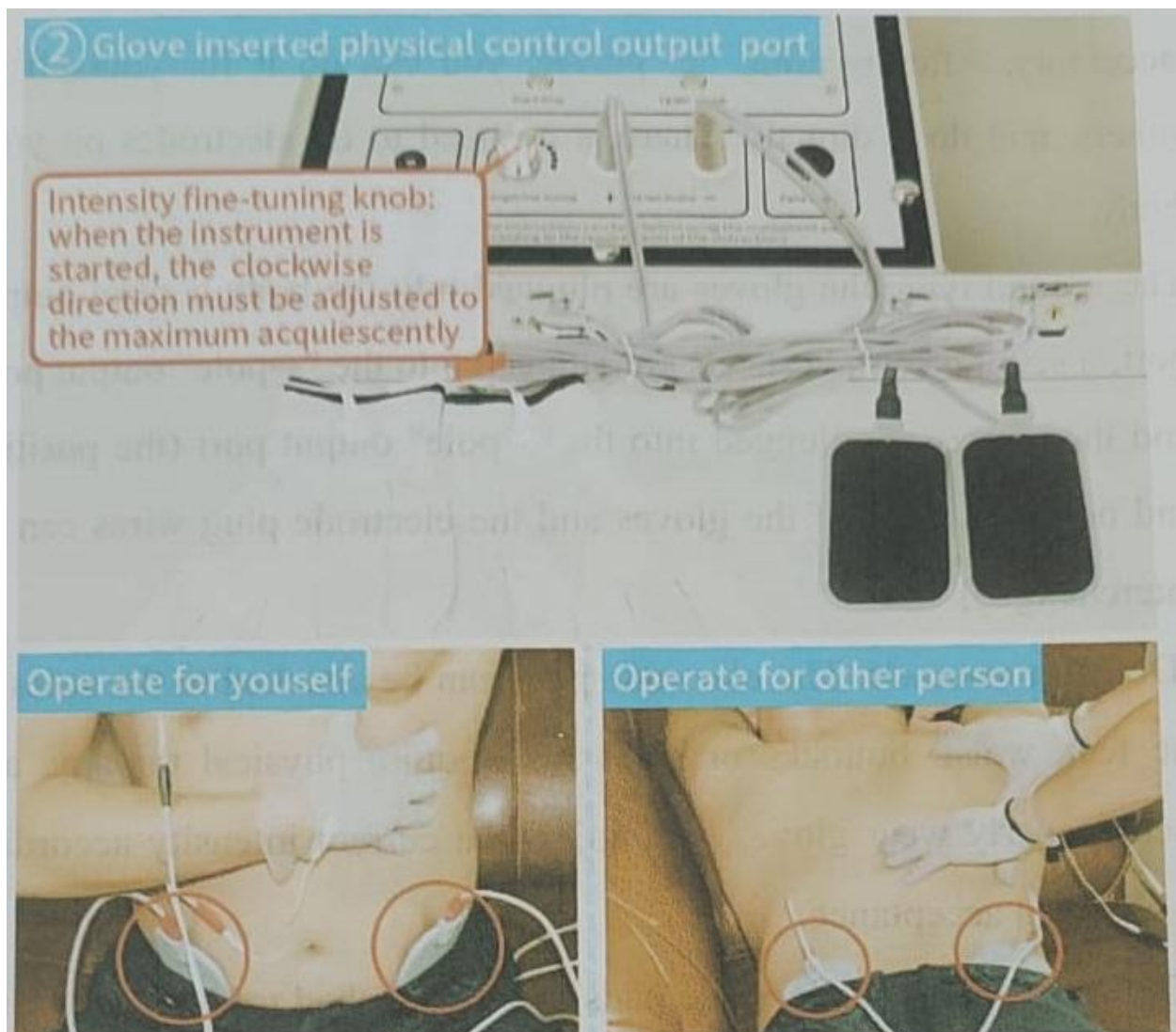



Controlul corpului \ funcționare de ieșire micro-hipertermie electrică:

Portul de ieșire „pol+” și portul de ieșire „pol-” trebuie conectate în același timp, apoi au electricitate. (Cele două linii de ieșire sunt aceleași, indiferent de polul pozitiv, poate fi conectat în mod dorit). Ambele porturi de ieșire trebuie conectate cu electrozi de fizioterapie încălzite, cum ar fi, pentru funcția de încălzire, vă rugăm să apăsați comutatorul luminos de încălzire electrică (timpul pentru preîncălzire este de aproximativ 3-5 minute, timpul de preîncălzire iarna trebuie prelungit ușor), intensitatea curentului este setată în funcție de acceptarea personală.

*Fă-o pentru tine: un set de electrozi poate fi atașat de tălpi, un alt set de electrozi poate fi atașat de talie, fese sau zone care necesită terapie fizică. Intensitatea curentului poate fi ajustată în funcție de acceptarea personală. Modul poate fi selectat în funcție de preferințele personale.

*Pentru alții: un set de electrozi poate fi atașat de tălpi, talie, fese sau zone care necesită terapie fizică, iar celălalt set de electrozi poate fi atașat de electroterapeut. Vă rugăm să selectați 1 sau modul de curent continuu, apoi, în funcție de acceptarea oaspetelui, reglați încet intensitatea curentului în sus. În acest moment, oriunde mâna tehnicianului atinge oaspetele, acesta va simți electricitate. (Folosiți corpul pentru a controla electricitatea pentru a-i ajuta pe alții să facă îngrijirea, kinetoterapeutul trebuie mai întâi să treacă prin electricitate speciala de rezistență, cel puțin 70 de viteze sau mai mult pot efectua operații de înfrumusețare, îngrijire a sănătății și fizioterapie pentru oaspeți și oaspeți.)

Metoda de antrenament cu energie electrică (pentru alții)

Această metodă este controlul electricității corpului uman. Înainte de a utiliza operația de control al corpului uman, tehnicianul trebuie să treacă printr-un antrenament special de rezistență electrică pentru a-și îmbunătăți propria capacitate de rezistență electrică și să folosească această operație după trecerea testului.

Operația de ieșire de auto-tratament este după cum urmează:

Foaia de electrod obișnuită rotundă este introdusă în ieșirea accesoriului, (trebuie contactate 2 foi de electrozi în același timp pentru a avea electricitate) acolo unde nu este potrivită sau atașată la piesa care trebuie reglată, simplu și ușor de utilizat. Modul poate fi selectat în funcție de preferințele personale, iar intensitatea curentului utilizat este setată în funcție de acceptarea personală.



Metoda de operare

1. Conectați cablul de alimentare și apăsați comutatorul de pornire. În acest moment, timpul panoului este afișat ca 30 de minute, apăsați tastele timp +,-(plus și minus) pentru a seta timpul de lucru. Timpul de lucru poate fi setat în mod arbitrar de la 1 la 99 de minute.
2. Cheie de reglare a forței. Intensitatea implicită de pornire este 0, apăsați tasta de ajustare a intensității pentru a seta intensitatea de ieșire. Când ajutați clientul să facă tratamentul, creșteți-l încet și ajustați-l la intensitatea acceptabilă pentru client. Intensitatea de ieșire poate fi ajustată în mod arbitrar în intervalul 0-99.
3. Mod: Instrumentul are 10 moduri fixe de kinetoterapie. Modul implicit de pornire este 1, care poate fi setat în funcție de diferite operații.
4. Înfășurați plasturele accesoriu de la ieșirea I cu un prosop umed și așezați-l pe un obiect care este izolat de pământ. La efectuarea tratamentului, cosmeticiana a călcat ușor pe prosopul umed înfășurat cu plasturele cu piciorul.
5. Înfășurați plasturele accesoriu de la ieșirea II cu un prosop umed și legați-l de client.
6. Apăsați tasta de pornire și instrumentul începe să iasă
7. Esteticianul atinge ușor partea în care clientul are nevoie de kinetoterapie și ajustează intensitatea și modul de ieșire în funcție de toleranța clientului și nevoile de kinetoterapie.

Dacă nu vă simțiți bine, vă rugăm să nu mai utilizați instrumentul. Începătorii trebuie să opereze sub supravegherea instructorului. În același timp, intensitatea curentului instrumentului poate fi reglată în funcție de intensitate, iar operațiunea este legată și de puterea esteticianului sau a terapeutului fizic.

Intretinere:

Curățare regulată: Asigură-te că păstrezi aparatul curat și uscat. Îndepărtează praful și murdăria de pe suprafața exterioară cu o cârpă moale și uscată.

Verificare a cablurilor și conexiunilor: Verifică periodic cablurile și conexiunile pentru a te asigura că sunt în stare bună și că nu există fisuri sau deteriorări. De asemenea, asigură-te că toate conexiunile sunt bine fixate pentru a preveni pierderile de semnal sau problemele de alimentare.

Depozitare corespunzătoare: Atunci când nu folosești aparatul DDS, depozitează-l într-un loc uscat și răcoros, departe de sursele de căldură sau umiditate excesivă. De asemenea, protejează-l împotriva șocurilor mecanice sau a expunerii la lumina solară directă.