


MANUAL UTILIZARE


Aparat masaj lombar



1. Design elegant și științific, potrivit pentru curba gâtului, 2,5 moduri de masaj cu 50 de intensități diferite
3. Setare de sincronizare reglabilă
4. Funcție de încălzire cu 1-3 niveluri, în funcție de nevoile dvs. de a selecta temperatura.
5. Folosind telecomanda cu ecran LCD clar pentru operare, țineți telecomanda în fața taliei în timpul utilizării acesteia

DETALII PRODUS

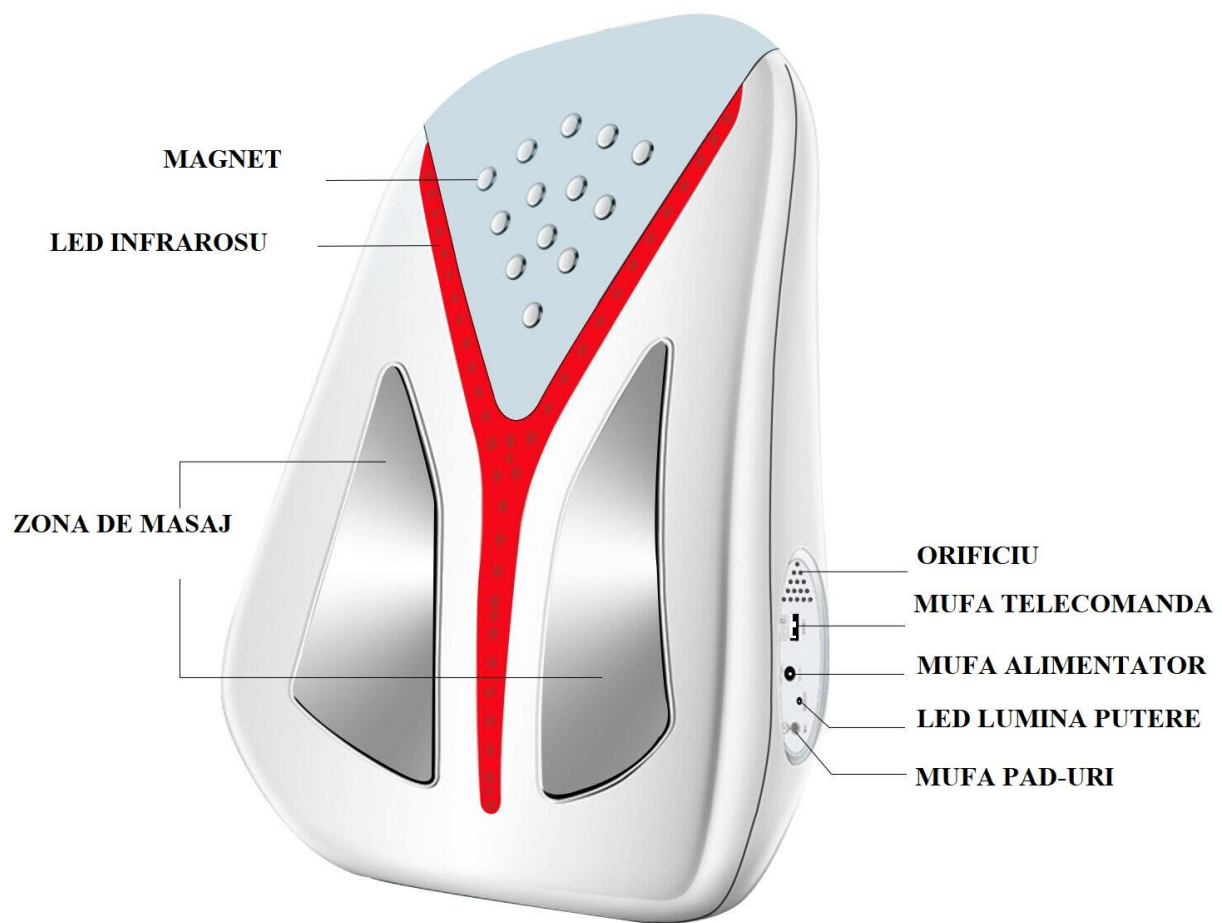

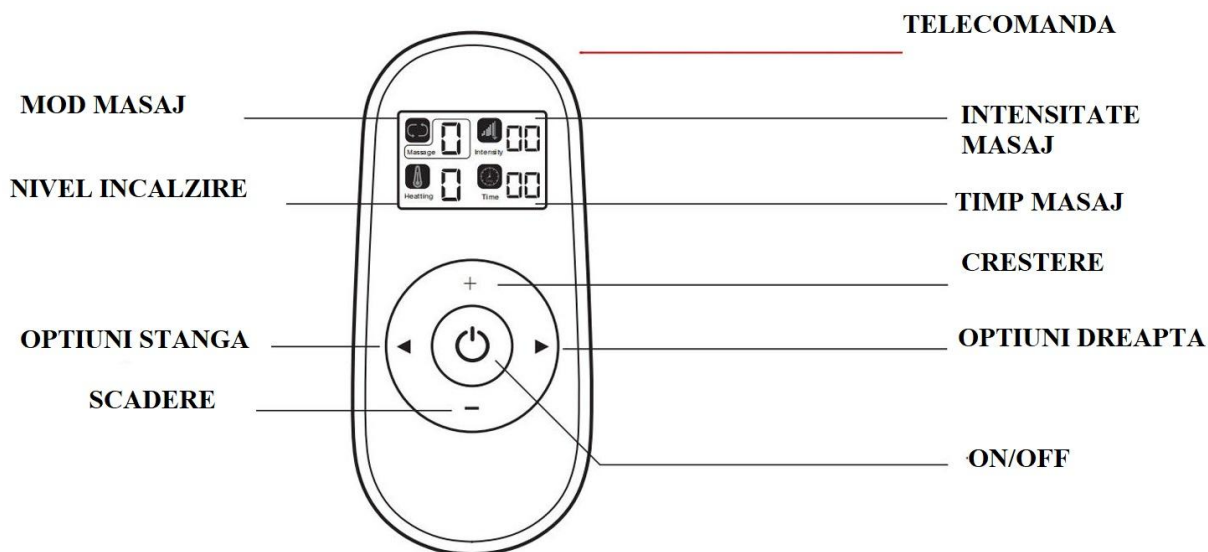

Operațiune

1. Funcționare cu alimentare

- Adaptor de alimentare

Adaptorul se conectează la mașina principală, apoi se conectează la priză, când se aprinde indicatorul care funcționează.

-Funcționarea mașinii principale

„Puls+”. „Puls”. „Modul”. „Căldură”. „Vibro”. „Timp” și butonul de pornire/oprire 7 butoane de pe aparat, când porniți aparatul va fi pornit în modul implicit de masaj, apăsați pe „Puls”. Începe să lucreze și să aleagă intensitatea cea mai potrivită,

2. Funcționarea dispozitivului

Apăsați scurt „Modul” pentru a schimba modul de masaj, pot fi selectate 5 moduri, se comută la noul mod de masaj, intensitatea va reveni la „0”, vă rugăm să apăsați din nou „Puls” pentru a regla intensitatea. Apăsați „Încălzire” pentru modul de încălzire, temperatura poate fi reglată în 3 nivele. De fiecare dată când apăsați, temperatura va crește cu un nivel. Când vă aflați în al treilea nivel, apăsați din nou pentru a opri încălzirea. Apăsați scurt butonul „Vibro” pentru a activa și dezactiva vibrația și parcurgeți 1-2-3 moduri.

1) Glisați comutatorul de alimentare în poziția „pornit” și plasați aparatul de masaj al coloanei vertebrale lombare aproape de talie, vă rugăm să vă asigurați că talia este umedă înainte de a-l folosi)

După utilizare, uscați foaia de metal a instrumentului cu un prosop uscat, care este convenabil de utilizat data viitoare.

2) Apăsați butonul de pornire, indicatorul luminos de alimentare este aprins, programul de lucru începe, mașina este în modul implicit Setarea intensității masajului este la valorile implicite '0', reglați modul de intensitate în funcție de propriile preferințe (de la slab la puternic)


3) Apăsați butonul Heat": intensitatea poate fi setată liber, iar temperatura moxibustiei poate fi reglată liber în trei niveluri


4) Modul puls: dispozitivul are 1-5 moduri de puls de masaj care pot fi setate liber

5) Modul intensitate: Există 1-50 de niveluri opționale. puteți selecta liber intensitatea pulsului.

6) Intensitatea implicită a intensității pulsului va reveni automat la „0”, când schimbați modul diferit al masajului.

7) Dacă trebuie să vă masați umerii, brațele și spatele, introduceți cablul de corecție cu electrod în ieșirea aparatului de masaj lombar, lipiți-l pe partea necesară

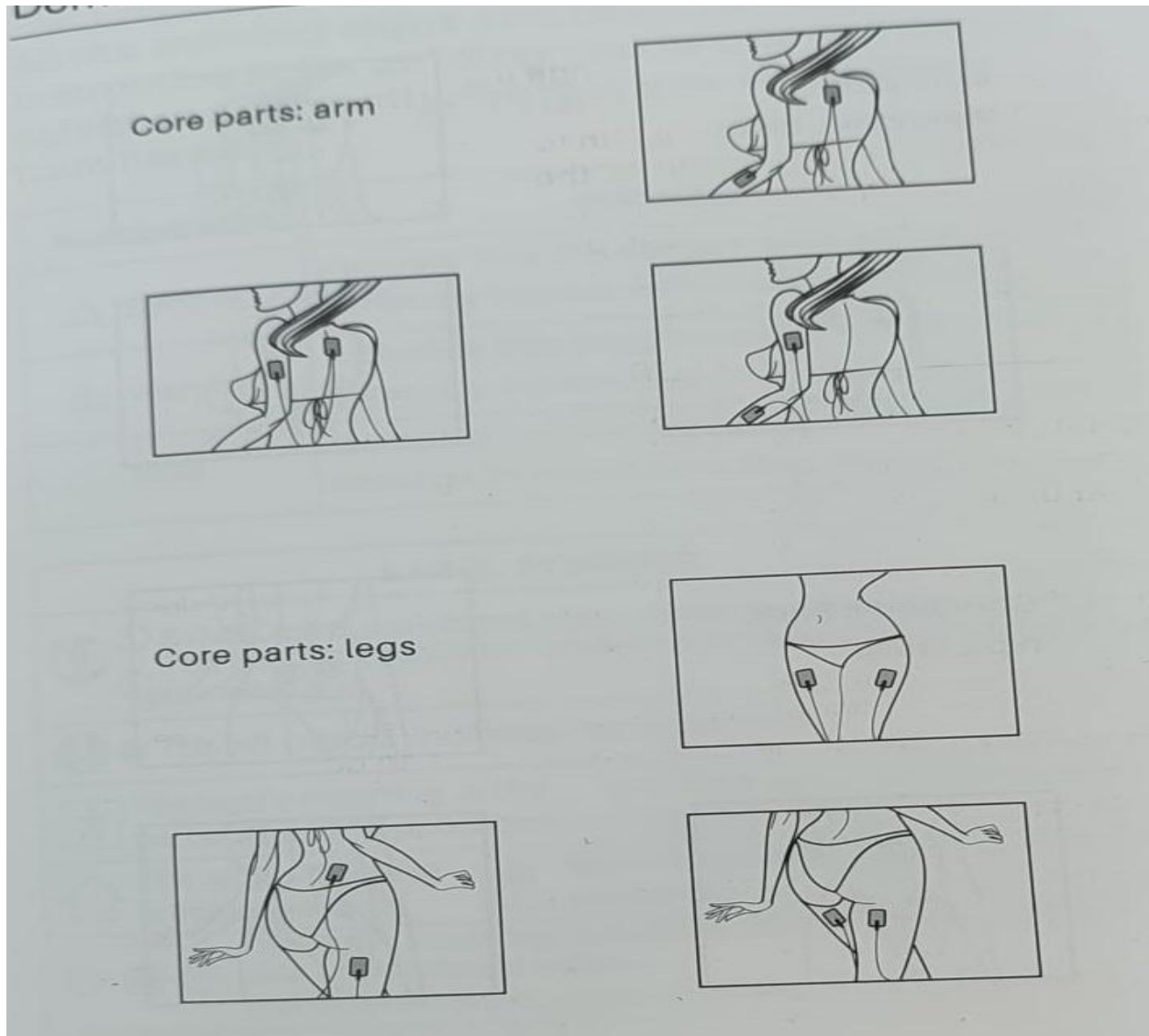

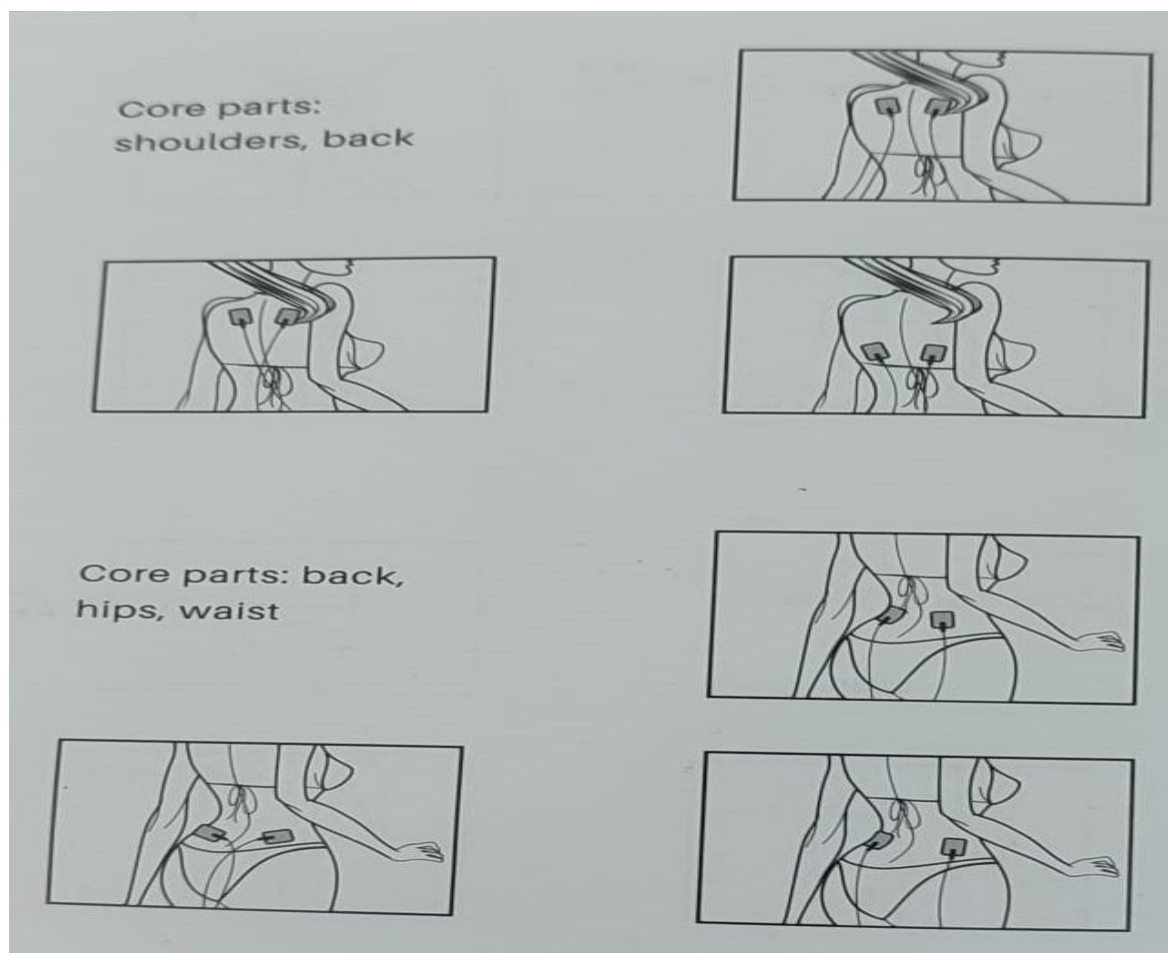

ATENȚIE!

Nu utilizați simultan cu alte echipamente electronice medicale, cum ar fi stimularea cardiacă, inima și plămânii artificiali, electrocardiograful etc. În caz contrar, va cauza pericol.

Dacă pacientul folosește echipament chirurgical de înaltă frecvență și acest aparat la în același timp, instrumentul poate provoca arsuri și dispozitivul poate fi, de asemenea, deteriorat.

Dacă este utilizat la 1 metru lângă echipament de terapie cu unde scurte sau cu microunde, ieșirea dispozitivului poate fi instabilă. Folosirea electrozilor aproape de piept va crește riscul de fibrilație a inimii.

Avertizare

Femeile însărcinate și femeile cu menstruație, piele sensibilă, boli de inimă, tensiune arterială anormală, tumoare malignă, pacienți cu boli cerebrovasculare, pacientă acută sau persoana care este tratată, vă rugăm să vă consultați medicul înainte de a utiliza aparatul.

1. Nu-l utilizați lângă inimă, cap, gură, organe genitale, boli de piele etc.
2. Interzis pentru utilizare de către pacienții cu afectare a percepției pielii sau căldură

Insensibil.

3. Nu utilizați acest produs în locuri cu căldură ridicată, inflamabilitate, radiații electromagnetice și umiditate.

- 4 Este interzisă utilizarea acestuia în timp ce faci baie, transpirați, sau dormiți.

Dezasamblarea, repararea sau modificarea neautorizată este interzisă, care poate cauza defecțiuni sau accident de electrocutare.

Notă

1. Nu mutați dispozitivul în procesul de utilizare a mașinii, dacă doriți schimbați poziția de masaj, vă rugăm să o opriți înainte de a o folosi. In caz contrar se va produce o stimulare puternică.
2. Copiii și persoane cu dezabilitati
3. Dacă nu vă simțiți bine din cauza utilizării acestui produs, vă rugăm să încetați imediat să îl utilizați și să consultați medicul dumneavoastră
4. Vă rugăm să scoateți ștecherul de alimentare când terminați de utilizat sau nu folosiți acest produs
5. Nu utilizați acest produs în afara domeniului de aplicare
6. Dispozitivul are o suprafață de încălzire, vă rugăm să aveți grijă când îl utilizați de către persoane care nu sunt sensibile la căldură.