

MANUAL DE UTILIZARE

Dispozitiv Profesional 6in1, Cavitate 5D



1. Notă de siguranță

1.1. Vă rugăm să nu dezamblați echipamentul și să nu încercați să efectuați alte operațiuni, care nu au fost indicate în instrucțiunile noastre. Toate lucrările de reparații trebuie efectuate doar de personal profesionist autorizat.

1.2. Vă rugăm să nu asamblați și nu utilizați acest echipament în timp ce vă aflați lângă apă sau când aveți mâinile ude. NU turnați lichidul pe el.

1.3. Vă rugăm să scoateți ștecherul din priză când ați îndeplinit condițiile de mai jos:

A. Echipamentul a atins lichid

B. Echipamentul are miros anormal, fumat sau zgomot puternic și puternic.

C. Cablul este rupt

D. Echipamentul este căzut și stricat

E. Când scoateți conexiunea laser pad

1.4. Vă rugăm să nu puneți nimic pe cabluri, nu așezați echipamentul în niciun loc unde cineva poate călca pe cablu.

1.5. Vă rugăm să scoateți cablul de alimentare după ce îl utilizați pentru siguranța dumneavoastră

1.6. Nu introduceți nimic în mufa echipamentului, altfel poate provoca incendiu sau atinge electricitatea.

1.7. Vă rugăm să nu puneți echipamentul pe ceva care nu sta drept

1.8. Compania noastră are dreptul de a modifica informațiile din aceasta introducere înainte de a anunța! Și păstrați explicațiile corecte pentru cele de mai sus.

2. Notă privind siguranța în exploatare

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți următorul conținut.

(Când doriți să scoateți conexiunea laser pad, trebuie să opriți în primul rand dispozitivul!!!)

2.1. Este esențial să faceți o setare diferită în funcție de cererea specifică de tratament.

2.2. Aplicarea aparatului nu trebuie să fie niciodată dureroasă și să provoace roșeață pe piele sau să lase urme.

2.3. Deplasați încet capetele de tratament pe pielea corpului sau a feței. Nu le lăsați să se oprească în niciun loc de pe piele.

2.4. Nu aplicați dispozitivul pe copii sub 7 ani. Tratamentul copiilor peste 7 ani necesită consultanță medicală.

2.5. Nu utilizați acest aparat dacă suferiți de febră, inflamație, dermatită (acnee, eczemă, herpes), veruci, răni deschise sau recent cusute, boli grave și progresive (cancer, SIDA, hepatită, boli ale sângelui etc. sau probleme de coagulare a sângelui). Nu aplicați aparatul dacă aveți sau ați avut flebită, după o intervenție chirurgicală la vene în ultimele două luni, dacă aveți varice sau furnicături la nivelul membrelor, dacă aveți nelămuriri consultați un medic.

2.6. Nu utilizați niciodată dispozitivul la o femeie însărcinată.

2.7. Aparatul poate fi utilizat pe toate zonele externe și sănătoase ale corpului, cu excepția ochilor, gâtului, urechilor, glotei și zonei genitale.

2.8. Nu trebuie aplicat în interiorul gurii, sau pe membrana mucoasă, sau pe mameloane sau alunițe fără aviz medical.

2.9. Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă suferiți de epilepsie. Aparatul nu trebuie utilizat de către nicio persoană care suferă de boli mintale.

2.10. În cazul tratamentului de lungă durată cu medicamente precum antiinflamatorii, anticoagulantele, antibioticele sau dacă pielea îți învinețește la cel mai mic șoc, cere sfatul medicului/medicului înainte de utilizare.

2.11. Nu aplicați niciodată pe părțile corpului cu bijuterii sau inel.


2.12. Utilizarea regulată a mașinii crește starea de bine; este mai bine să nu opriți utilizarea acestuia pentru o perioadă prelungită de timp. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și a recomandărilor de utilizare poate aduce rezultate mai puține decât cele așteptate. Nu utilizați dispozitivul mai mult decât timpul recomandat.

- 2.13. Dacă simptomele dumneavoastră nu se ameliorează sau dacă aveți îndoieli cu privire la utilizare, consultați medicul dumneavoastră.
- 2.14. Efectul poate varia în funcție de vârstă, obiceiuri de viață (nivel de activitate fizică, dietă etc.).
- 2.15. Aparatul poate fi utilizat după orice intervenție chirurgicală plastică numai în conformitate cu instrucțiunile chirurgului.
- 2.16. Aparatul este conceput numai pentru uz profesional, orice utilizare personală a acestui dispozitiv este interzisă.
- 2.17. Timpul de lucru continuu al mașinii nu trebuie să depășească 2 ore. Cel mai bun mod este oprirea, lăsați mașina să se odihnească timp de 10-15 minute. După ce mașina a funcționat timp de o oră.

Introducere

Această mașină combină mai multe tehnologii de remodelare corporală, inclusiv radiofrecvență (RF), lipoliză, și alte funcții pentru a oferi rezultate eficiente în slăbit și tonifiere.

Componente

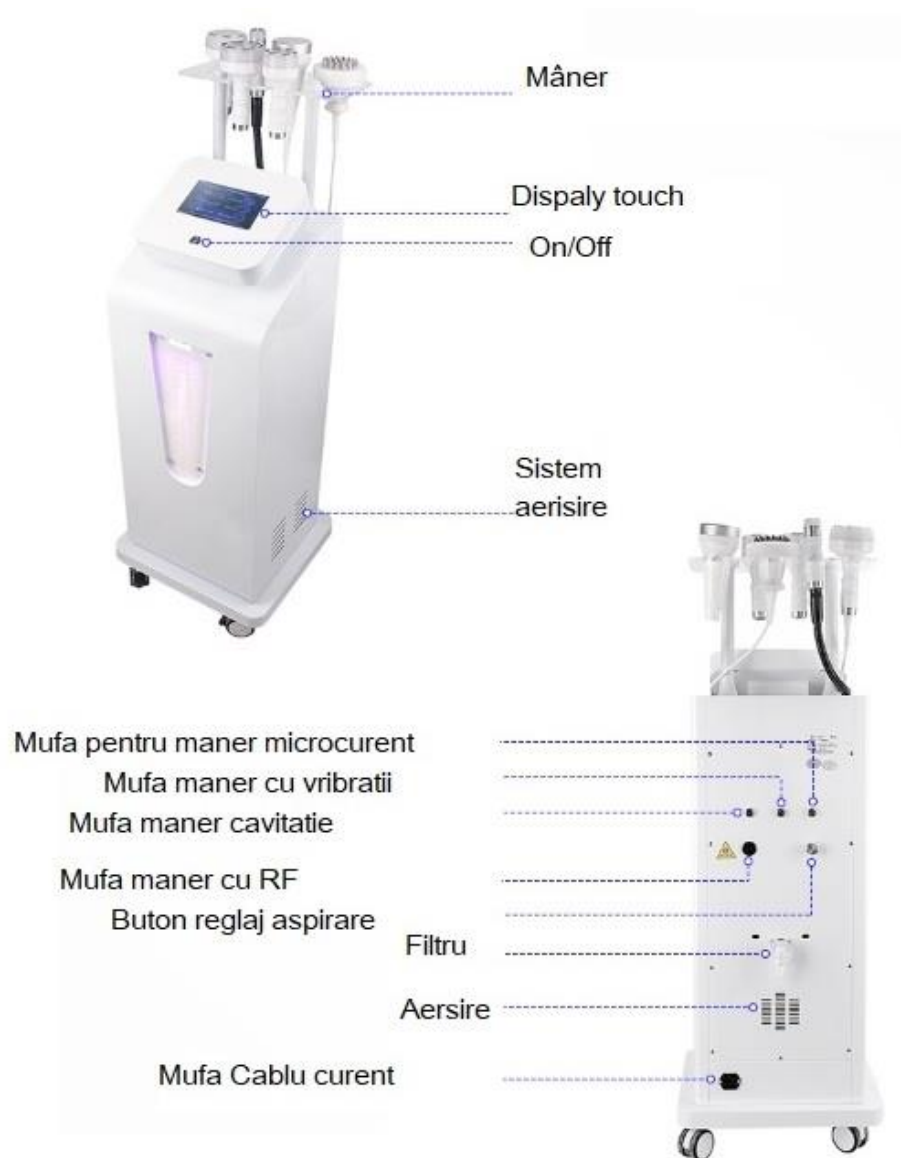



Piesă de mână RF cu vacuum mic
Pentru față, gât



Piesă de mână RF cu vacuum mediu – Pentru umeri, șold, talie, gât



Piesă de mână RF cu vacuum mare – Pentru abdomen, spate, membre, șold



Piesă de mână cu vibrații – Pentru umeri, gât



Perie cu microcurent DDS – Pentru spate



Piesă de mână cu cavitație ultrasonică – Pentru abdomen, talie, membre

Configurare inițială

1. Despachetare și verificare:

- Scoateți mașina din ambalaj și verificați dacă toate componentele sunt prezente și în stare bună.

2. Instalare:

- Conectați toate manipurile la porturile corespunzătoare de pe unitatea principală.
- Asigurați-vă că mașina este plasată pe o suprafață stabilă și plană.



3. Alimentare:

- Conectați cablul de alimentare la priză și porniți mașina.

Utilizare

1. Selectarea modului:

- Porniți mașina și selectați modul dorit de pe panoul de control.
- Alegeți intensitatea și durata tratamentului în funcție de zona de tratat și de nevoile pacientului.

2. Aplicarea gelului:

- Aplicați un strat subțire de gel de conducție pe zona de tratat pentru a asigura o penetrare eficientă a undelor RF sau ultrasonice.

3. Tratamentul:

- Utilizați manipurul ales și masați ușor zona de tratat cu mișcări circulare.
- Asigurați-vă că manipurul este în contact constant cu pielea pentru a evita disconfortul.

4. După tratament:

- Ștergeți zona tratată cu un prosop curat.
- Aplicați o cremă hidratantă pentru a calma pielea.





Întreținere

1. Curățare:

- După fiecare utilizare, curățați toate manipurile cu o soluție dezinfectantă.

2. Verificări periodice:

- Verificați cablurile și conexiunile pentru orice semne de uzură.
- Asigurați-vă că toate componentele sunt funcționale înainte de fiecare utilizare.

Metoda generală de depanare: opriți alimentarea și reporniți instrumentul.

Funcții

Capăt / Piesă de mână	Cum funcționează	La ce ajută
Vid + RF (mic – S)	Vid (presiune negativă) + radiofrecvență ușoară	• Lifting facial • Reducerea edemului și a pungilor sub ochi • Îmbunătățește fermitatea pielii • Strânge porii
Vid + RF (mediu – M)	Vid + radiofrecvență pe zone mai mari (umeri, șolduri, talie)	• Remodelare corporală • Drenaj limfatic • Reducerea tensiunii musculare locale • Ameliorarea durerilor
Vid + RF (mare – L)	Vid + radiofrecvență intensă pentru zone mari (abdomen, spate, coapse)	• Conturare corporală • Activarea circulației sanguine și limfatice • Relaxarea mușchilor mari • Sprijină eliminarea retenției de apă
Lumină + BIO + căldură	LED (fototerapie) + microcurent BIO (biostimulare) + căldură	• Stimulează producția de collagen și elastină • Îmbunătățește tonusul și fermitatea pielii • Oferă efect anti-îmbătrânire • Îmbunătățește circulația și oxigenarea celulară
Vibrație + căldură	Vibrații mecanice + încălzire locală	• Relaxare musculară profundă • Ameliorează durerile și tensiunile musculare • Stimulează circulația • Efect de masaj calmant
Cavitatie	Unde ultrasonice de joasă frecvență (80 kHz)	• Reducerea depozitelor de grăsime • Conturare și subțiere corporală • Ajută la reducerea celulitei • Lasă pielea mai netedă și mai tonifiată
Perie cu microcurent DDS	Electrozi tip pieptene + microcurent biologic	• Stimularea meridianelor și punctelor nervoase • Crește producția de ATP și metabolismul celular • Relaxare și tonifiere musculară • Sprijină detoxifierea prin drenaj limfatic

Precauții

- Evitați utilizarea mașinii pe pielea rănită sau inflamată.
- Consultați un specialist înainte de a utiliza mașina dacă aveți condiții medicale preexistente.
- Nu utilizați mașina în zonele cu dispozitive medicale implantate, cum ar fi pacemakerile.

Dacă nu folosiți instrumentul pentru o perioadă lungă, protejați-l cu o pungă care împiedică umezeala și praful. Pentru a preveni deteriorarea componentelor electronice interne din cauza umezelii, alimentați dispozitivul timp de o oră la fiecare 15 zile.

Concluzie

Această mașină multifuncțională poate fi un instrument eficient pentru slăbit și remodelare corporală atunci când este utilizată corect. Urmați întotdeauna instrucțiunile și recomandările pentru a obține cele mai bune rezultate și pentru a asigura siguranța utilizatorului.

Dacă aveți nevoie de instrucțiuni mai detaliate sau specificații tehnice, consultați manualul utilizatorului furnizat de producător.

Specificatii tehnice

Categorie	Detalii
Alimentare	110–220 V, 50/60 Hz
Putere totală	1200 W
Putere cavitație	80 kHz
Durata utilizare recomandată	40 – 60 minute / ședință
Greutate netă	15 kg
Dimensiuni	48.5 × 45 × 113 cm
Ecran	Touch screen color
Număr accesorii	6 piese de mână
Tipuri accesorii	Vacuum RF mic, mediu, mare / Cavitație / Vibrații + căldură / Perie microcurent DDS
Tehnologii integrate	Vacuum + Radiofrecvență, Cavitație ultrasonică 80 kHz, BIO microcurent + lumină + căldură, Vibrații + căldură, DDS microcurent
Scop principal	Degrăsare și slăbire corporală
Metodă de acțiune	Distrugerea țesutului adipos, remodelare și tonifiere corporală