

MANUAL UTILIZARE

Aparat TENS, Microcurenți cu impulsuri



EMS vine de la Electrical Muscle Stimulation (Stimulare Musculară Electrică) și este o tehnică non-invazivă de tonifiere a musculaturii și ardere a grăsimilor. În saloanele de remodelare corporală, tehnologia EMS este o metodă populară deoarece nu este dureroasă și da rezultate vizibile rapid.

Dispozitivele care folosesc această metodă, au capete ce se aplică direct pe zona care are nevoie de remodelare și folosesc impulsuri electrice care stimulează contracția involuntară a musculaturii.

Funcțiile instrumentului

Slăbire și pierdere în greutate:

Micro-curentul pulsatoriu produce furnicături și contracții ale mușchiului, consumă și descompune o cantitate mare de lipocite; Aplicarea de plasturi electrice pe puncte ale corpului ajustează funcția de *jing*(meridiane principale) și *luo*(ramificații secundare ale meridianelor), limitează producerea grăsimii, promovează descompunerea și metabolizarea grăsimii.

Strângerea pielii:

Micro-curentul pulsatoriu stimulează vitalitatea pielii, accelerează metabolismul celulelor pielii; Micro-curentul stimulează nervii, strânge și contractă porii, făcând pielea mai fină și strălucitoare.

Îngrijirea sânilor:


A. Micro-curentul pulsatoriu produce furnicături și contracții ale mușchiului sânelui, antrenează mușchiul pieptului, făcând sânii fermi și puternici.

B. Aplicarea de plasturi electrice pe punctele sânelui ajustează *jing* și *luo*, reglează secrețiile interne ale corpului, stimulează producerea de hormoni feminini și promovează a doua creștere a sânilor.

Relaxarea oboselii și întărirea imunității:

Micro-curentul pulsatoriu acționează asupra întregului corp, modurile diferite oferă un masaj complet, accelerează circulația sângelui, relaxează și ameliorează spasmele musculare.

Introducerea panoului

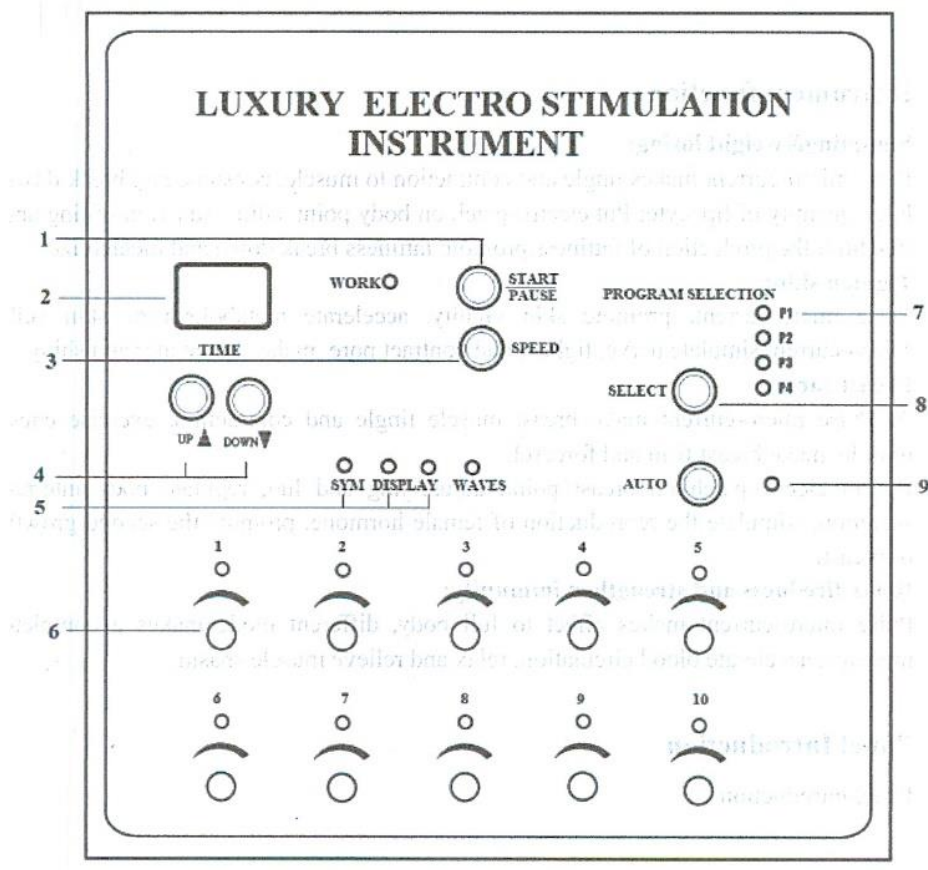

1. Pornire/Pauză	Buton pentru pornirea sau oprirea temporară a aparatului în timpul utilizării.
2. Afișaj timp de lucru	Ecran mic care arată durata setată pentru sesiunea de electrostimulare.
3. Reglare viteză	Buton pentru modificarea vitezei impulsurilor electrice.
4. Reglare timp	Permite creșterea sau scăderea duratei unei sesiuni.
5. Afișaj pentru trei viteze	Indicator luminos care arată care dintre cele trei niveluri de viteză este activ.
6. Reglare frecvență joasă	Buton pentru reglarea intensității și frecvenței joase a micro-curentului.
7. *4 programe de selecție	Există patru programe prestabilite pentru diferite tipuri de stimulare (de exemplu: slăbire, tonifiere, relaxare, îngrijire piele).
8. Selectare program	Buton prin care utilizatorul alege unul dintre cele 4 programe.
9. Program automat	Setare care pornește un program automat, combinând diferite moduri de stimulare fără a fi nevoie de ajustări manuale.

***4 programe de selecție:**

Unde dense (P1): Cele mai potrivite unde pentru a stimula celulele glandulare mamare să crească. Prin loviturile produse de plasturii electrici, se pot întări și tonifia mușchii pectorali externi, pectorali interni și costocapulari. Este eficient în promovarea creșterii sânilor și în îmbunătățirea fermității acestora, reducând lăsarea sau căderea.


Unde rare (P2): Îmbunătățesc circulația sângelui, stimulează metabolismul, tonifică și întăresc mușchii.

Unde dense & rare (P3): Strâng și relaxează mușchiul, ceea ce provoacă un exercițiu aerobic, dizolvă și consumă grăsimea, epuizează energia internă în exces, blochează acumularea de grăsime, transformă grăsimea solidă în acizi grași liberi.

Unde fluctuante (P4): Comprimă grăsimea pentru a o descompune în căldură și apă, ajută la eliminarea deșeurilor și toxinelor din corp și a acizilor grași liberi. Aceste unde sunt potrivite pentru masajul întregului corp.

Unde automate: Selectează automat cele 4 tipuri diferite de unde, fiecare undă durează alternativ câte 10 secunde.

Astfel, P2 / P3 / P4 sunt utilizate pentru pierdere în greutate și slăbire.
Se recomandă utilizarea o dată pe zi, timp de 10 zile, ca un curs de tratament.

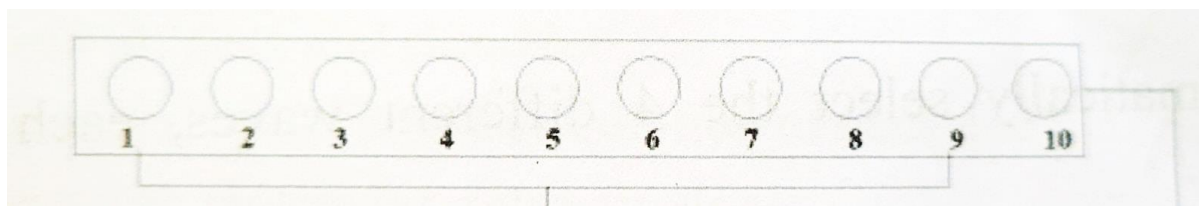


Ieșire de joasă frecvență (pentru electro-patch)

Ieșire de joasă frecvență (pentru electro-bag)

Instrucțiuni de utilizare:

1. Conectați aparatul și apăsați butonul de pornire în poziția **ON**.
2. Apăsați butonul **SELECT** pentru a alege unul dintre programele pentru slăbit P1–P4 sau apăsați butonul **AUTO**.
3. Apăsați butonul **SPEED** pentru a selecta unda pentru slăbit.
4. Setați cronometrul (timpul de lucru).
5. Conectați electrozii și plasați-i în zona cu grăsime, poziționându-i simetric și la 5 cm unul de altul, apoi fixați-i cu o curea.
(Atenție: Nu îi plasați în zona inimii.)
6. Apăsați butonul **PAUSE/START** pentru a începe procesul de slăbire.
7. Ajustați intensitatea ieșirii la un nivel pe care îl puteți suporta.
8. După finalizarea sesiunii pentru slăbit, scoateți aparatul din priză.

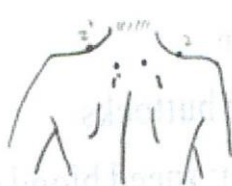

Img. 1




Img. 2




Img. 3



Img. 4

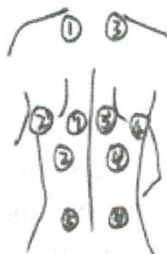


Img. 5

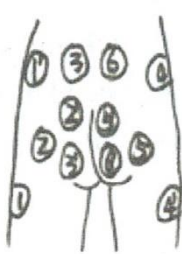

Img. 6



Img. 7

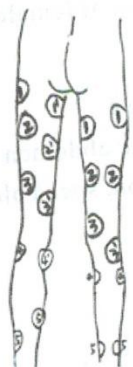

Img. 8

Nr. Imagine	Metoda	Funcție
1	gât și umeri	acelerează circulația sângelui la nivelul gâtului și umerilor, reduce grăsimea, relaxează oboseala
2	umeri și brațe	acelerează circulația sângelui, activează meridianele <i>sanyin</i> și <i>sanyang jingluo</i> , reduce grăsimea
3	sâni	acelerează circulația sângelui la nivelul sânilor, activează vasele mamare, stimulează creșterea sânilor, antrenează mușchiul pieptului, reglează secreția hormonilor feminini

4	abdomen	acelerează circulația sângelui în abdomen
5	spate	acelerează circulația sângelui în spate, reduce grăsimea, antrenează mușchii spatelui, relaxează oboseala spatelui
6	fese	acelerează circulația sângelui în zona feselor, antrenează mușchiul fesier
7	brațe	acelerează circulația sângelui în brațe, activează canalele <i>jing</i> și <i>luo</i> , reduce grăsimea, antrenează mușchiul brațului
8	picioare (5 perechi pentru fiecare picior)	acelerează circulația sângelui în picioare, reduce grăsimea, antrenează mușchiul picioarelor

Instrucțiuni suplimentare:

1. Apăsați **START/PAUSE** pentru a porni funcția de joasă frecvență, selectați programul potrivit conform necesității tratamentului.
2. Setarea timpului: reglați timpul între 0 și 60 minute.
3. Slăbire: 30–40 minute, zilnic sau o dată la două zile, 15 ședințe = un ciclu de tratament.
 - Îngrijirea sânilor: 20–30 minute, o dată pe zi, 15–30 ședințe = un ciclu de tratament.
4. Reglați intensitatea frecvenței joase cu ajutorul butonului, în funcție de confortul clientului, și ajustați frecvența corespunzător.

Atenție: reglarea intensității trebuie făcută treptat. La tratamentul pentru sâni, durerea ușoară trebuie tratată cu o intensitate mică, în funcție de confortul clientului.

5. În timpul tratamentului, se poate schimba frecvența, reseta timpul, regla intensitatea.
6. Când se folosește electro-bag, acesta trebuie conectat la ieșirea de joasă frecvență pentru electro-bag. Reglați intensitatea de joasă frecvență pentru electro-bag.
7. După terminarea tratamentului, opriți aparatul, rotiți butonul la zero, scoateți cablul electro-patch.
8. Curățați și sterilizați electro-patch-ul pentru utilizarea următoare.

Sfaturi utile

Atenție:

1. Înainte de tratament, curățați zona corpului și verificați dacă butonul de intensitate este setat pe zero.
2. Se recomandă aplicarea unui gel sau a unei creme de modelare corporală ori a unui alt mediu de conducție pe electro-patch pentru a evita conductivitatea neuniformă și senzația de înțepătură.
3. Dacă pielea prezintă tulburări de sensibilitate, durata tratamentului trebuie redusă.
4. În timpul tratamentului, cosmeticianul trebuie să observe atent reacțiile clientului și să ajusteze intensitatea în mod corespunzător.
- 5.

Persoanele cu următoarele condiții NU trebuie să folosească tratamentul:

1. Hemofilie
2. Răni la piele
3. Boli de inimă
4. Obiecte metalice în corp
5. Febră mare sau boli infecțioase acute
6. Tumori
7. Sarcină

Defecțiune	Soluție
Pornire, dar fără răspuns	Verificați dacă firul de alimentare este conectat corect. Verificați dacă butonul de pornire este apăsat
Fără ieșire (no output)	Verificați dacă accesoriul este conectat corect la unitatea principală
Supraîncălzirea aparatului	Dacă a fost folosit prea mult timp, opriți aparatul și lăsați-l să se răcească în mod natural. Verificați dacă tensiunea este corectă (verificarea trebuie făcută de un tehnician autorizat)
Fără curent	Verificați dacă siguranța este arsă; dacă da, înlocuiți cu una nouă

Specificații produs

- Alimentare: 110V / 220V / 230V / 240V
- Frecvență: 50Hz / 60Hz
- Putere: 70W
- Dimensiuni: 36×34.1×42.5 cm