

MANUAL DE UTILIZARE


ORTO RELAX Aparat de masaj cervical



DETALII PRODUS

Cu ajutorul aparatului de masaj puteți beneficia de un masaj relaxant, revigorant chiar la d-voastră acasă.

ROLE DE MASAJ SHIATSU-Aparatul de masaj este echipat cu 2 capete cu câte 8 bile fiecare. Datorită designului oferă cu ușurință un masaj relaxant pentru fiecare parte a corpului: gât, umeri, mâini, spate, coloană vertebrală, picioare (gambe, coapse, tălpi). Dispozitivul este fabricat din piele sintetică de înaltă calitate și țesătură din plasă respirabilă, ceea ce face ca masajul să fie și mai confortabil.

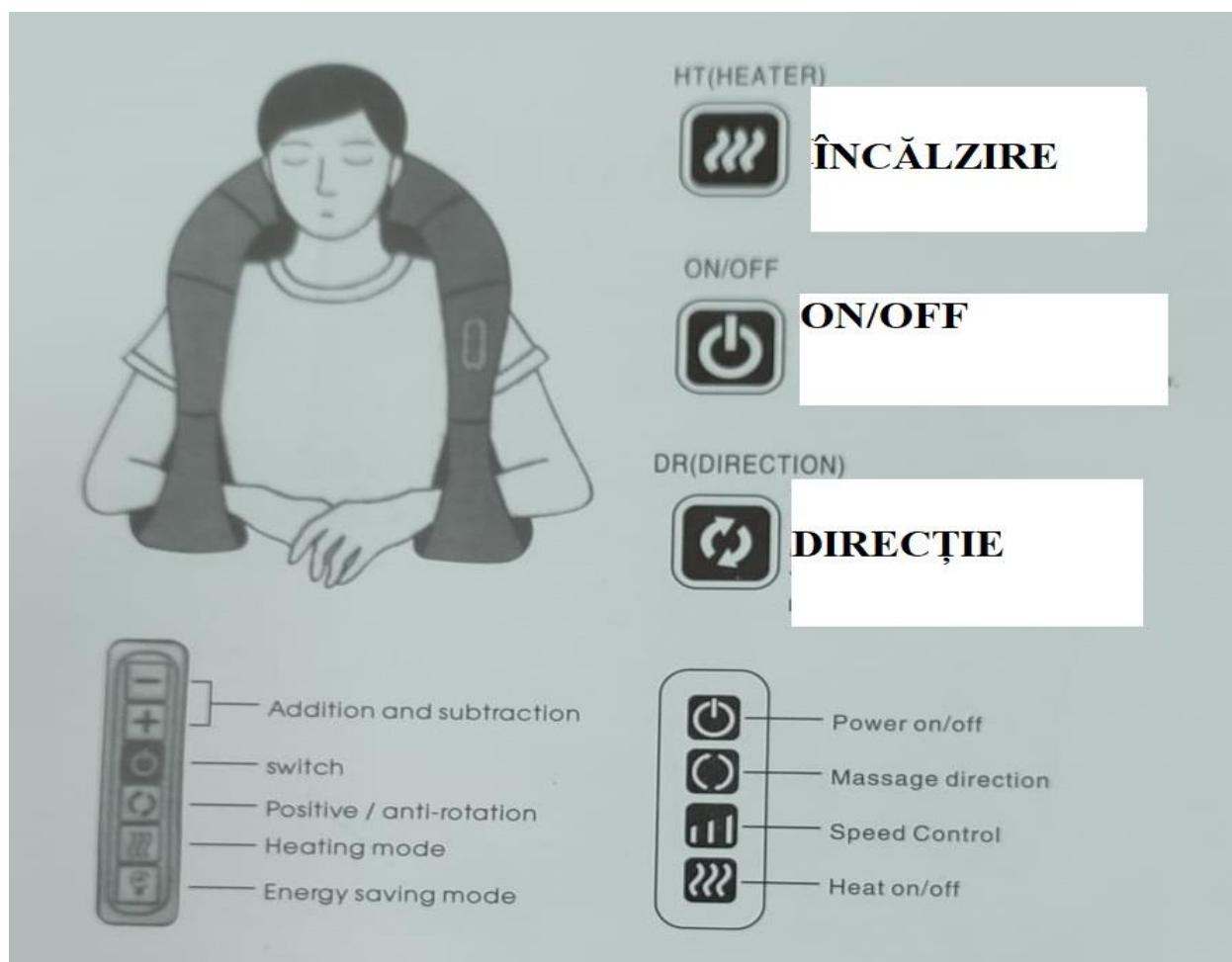

BENEFICII

Îmbunătățește calitatea somnului

Masajul poate face corpul să se relaxeze, să elimine oboseala și să ușureze presiunea.

Masajul poate îmbunătăți circulația sângelui pentru organism, îmbunătățește, relaxează mușchii pentru a menține echilibrul corporal între yin și yang.

Masajul poate îmbunătăți funcția gastrointestinală, îmbunătățește digestia.

Ajută digestia, ameliorează constipația și alte circumstanțe gastrointestinale.

Multi-function massager



Masajul gâtului și umărului

Noul design, designul curbat rafinat, masează strâns fiecare poziție.

Mod unic de frământare a masajului

Renunță la masajul tradițional și beneficiază de un masaj profund pe gât, 4 capete de masaj se frământă și se masează în sus sau în jos, te lasă să te simți relaxat.

Funcția unică de căldură

Funcția de căldură vă relaxează, ameliorează durerile.

Adaptor priza și de masina

Echipat cu adaptor extern, îl puteți utiliza cu sursa de alimentare de 12 V a vehiculului, astfel încât să vă puteți bucura de distracția de masaj în orice loc.

Detalii produs

Tensiune nominală: DC12V

Putere nominală: 24W

Frecvența nominală: 50 HZ

Temperatura infraroșu: 38 grade

ATENȚIE

Asigurați-vă ca adaptorul și dispozitivul sunt conectate corect, înainte de utilizare.

* Nu trageți de conexiune forțată, conexiunea proastă a transformatorului va face ca produsul să nu mai funcționeze.

Nu-l utilizați în baie și în medii umede.

Vă rugăm să nu așezați produsul pe suprafețele solide pentru utilizare, deoarece se va deteriora. Produsul este cu încălzire la suprafață, oamenii care sunt sensibili trebuie să-i acorde atenție.

* Dacă un produs este ceva în neregulă, nu-l dezamblați.

Avertisment: pentru a reduce riscul de incendiu, arsuri, șoc electric sau alte răni, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni.

- 1) Când produsul nu este utilizat, vă rugăm să scoateți ștecherul din priză.
- 2) Pentru a evita supraalimentarea, șocurile electrice sau rănirea, nu utilizați produsul în perne sau păaturi aflate în funcțiune.
- 3) Dacă produsul este aproape de copii cu deficiențe fizice și dizabilități, în timpul utilizării aceștia au nevoie de supraveghere.
- 4) Vă rugăm să-l utilizați conform manualului produsului. Nu folosiți accesorii nefabricate recomandate de alt producător.

Pericol:

Pentru a reduce riscul pericolului de electrocutare, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos:

- 1) După utilizarea sau înainte de curățare a produselor, vă rugăm să scoateți ștecherul din priză.
- 2) Dacă produsul cade în apă, nu atingeți produsul umezit. Trebuie să scoateți ștecherul.

- 3) Nu utilizați produsul când faceți un duș sau o baie.
- 4) Nu puneți produsul în apă sau alt lichid.

Probleme intampinate

Dacă aparatul de masaj este încă în starea de defecțiune sau nu este functional, vă rugăm să opriți alimentarea și să deconectați ștecherul. NU dezasambla sau repara singur aparatul de masaj.

Motive posibile/Soluții

1) Nu se poate porni aparatul de masaj -Asigurați-vă că ștecherul este în priză. Confirmați că comutatorul este pornit. Confirmați dacă butonul a fost apăsător.

2) Când se utilizează, încetează brusc să funcționeze.

Vă rugăm să verificați dacă ștecherul este scos sau nu. Confirmați dacă mufa are o conexiune proastă.

Apăsător butonul de comandă prea încet.

Cronometrul automat se setează pentru 15 minute. Timpul a trecut.



use at home



use in car



DC 12v
certificated adapter



car adapter