

MANUAL DE UTILIZARE

Aparat de masaj 3D, portabil, reîncărcabil, fără
fir, 8 capete de masaj



Descriere:

Acest aparat de masaj portabil realizeaza un masaj impotriva celulitei, de îndepărtare a celulitei sau mai bine zis un aparat de sculptură corporală. Vă puteți masa întregul corp, în special gâtul, spatele, umărul, brațul, abdomenul, stomacul, burta, coapsele și fesele. Poti face astfel, in același timp, exerciții pentru sculptarea corpului, conturarea corpului sau slăbirea corpului. In plus, poate fi folosit si cu ulei esențial pentru a te bucura de un masaj spa.

Avertismente și precauție:

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să urmați instrucțiunile de siguranță și instrucțiunile de utilizare adecvate pentru a asigura performanță și siguranță optime. Masajul corporal este compact și puternic, astfel încât să îl puteți utiliza pe zonele corpului, în special pe spate, umeri, picioare. Capetele de masaj oferă diferite stiluri de masaj pentru a obține cele mai bune beneficii pentru corp.

ATENȚIE:

- Nu utilizați dispozitivul dacă sunteți însărcinată sau suferiți de probleme cardiace sau de orice leziuni fizice, consultați-vă medicul dacă nu sunteți sigur.
 - Folosiți aparatul doar la o oră după masă.
 - Nu utilizați dispozitivul pe aceeași zonă a corpului mai mult de 15 minute
 - Nu utilizați dispozitivul în baie sau în locuri umede.
 - Dacă dispozitivul nu funcționează, vă rugăm să opriți imediat alimentarea și să contactați centrul de service al produsului
 - Nu utilizați aparatul când vă simțiți rău
 - Atunci cand schimbatii capate, asifigurati-va ac acesta este oprit. că dispozitivul nu mai
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, nu încarcați dispozitivul pentru a nu poroduce un scurt circuit
- Nu scoateți șuruburile și nu încercați să dezamblați
- Nu scufundați în apă. Păstrați departe de lichide sau surse de căldură
Păstrați orificiile de ventilație ferite de praf și reziduri.
Nu utilizați mai mult de 30 de minute.
Deconectați încărcătorul de la bateria dispozitivului după încărcare sau înainte utilizare.
Nu utilizați pe rani sau cicatrici

Mai multe atașamente de masaj pentru alegere:

- Cap petală
- Undă capul
- Cap de minge
- Cap plat
- Cap de anulare
- Cap cu mai multe degete
- Cap de perie
- (Capul de masaj este configurat cu un pachet de probă reală) A Notă: Nu utilizați cap cu mai multe degete, cap de perie și cap mată cu capac din plasă, Cap înghețat

Utilizare și funcționare:

1. Încărcați complet produsul dacă bateria este descărcată.
 2. Apăsăți lung (tineți 3 secunde) butonul On-off/Mode pentru a porni/opri aparatul.
 3. Apăsăți butonul scurt, On-off/Mode pentru a schimba modul în funcție de dvs cerință, 5 moduri de alegere.
 4. Apăsăți butonul de putere pentru a regla viteza în funcție de cerințele dvs.
 - 6 niveluri de viteză pentru alegere.
 5. Pentru prima dată să utilizați mai bine cu o viteză de masaj mai mică, treptat crește viteza după adaptare.
 6. Pentru a menține aparatul de masaj în cea mai bună stare de utilizare, se recomandă să nu utilizați mai mult de 15 minute de fiecare dată, acesta se va opri automat după acest timp.
 7. După utilizare, opriți alimentarea.
 8. Indicatorul luminos devine roșu când lucrează și devine albastru când se încarcă.
-



Indicator luminos
Lumină roșie când este în uz
Lumină albastră atunci când
este încărcat

On-off/Mod
Apăsăți și mențineți apăsat timp de 3 secunde
pentru a porni
Apăsăți și mențineți apăsat timp de 3 secunde
pentru a opri
Faceți clic pentru a comuta între moduri

Putere
Faceți un clic scurt pentru
a comuta viteza




Instrucțiuni de încărcare

1. Vă rugăm să încărcați complet produsul înainte de prima utilizare sau după neutilizare pentru o lungă perioadă de timp.
2. Opriți produsul înainte de a-l încărca
3. Indicatorul luminos clipește în culoarea albastră în timpul încărcării și ramane aprins albastru încontinuu când este încărcat complet.
4. Deconectați cablul USB de la conectorul de încărcare, după încărcarea completă.

Instrucțiunile de utilizare

Țineți aparatul într-o mână. Rotiți capacul cu panza și îl scoateți pentru a atașa capatul de masaj dorit. După poziționarea capatului pentru masaj, cuplați capatul principal cu panza, apoi porniți aparatul pentru masare.

Nu utilizați capatul cu panza pentru capetele care sunt cu proeminențe precum capetele pentru cap, capul perie, multifinger, și capatul rece (cel care se îngheață). (vezi poza 1).

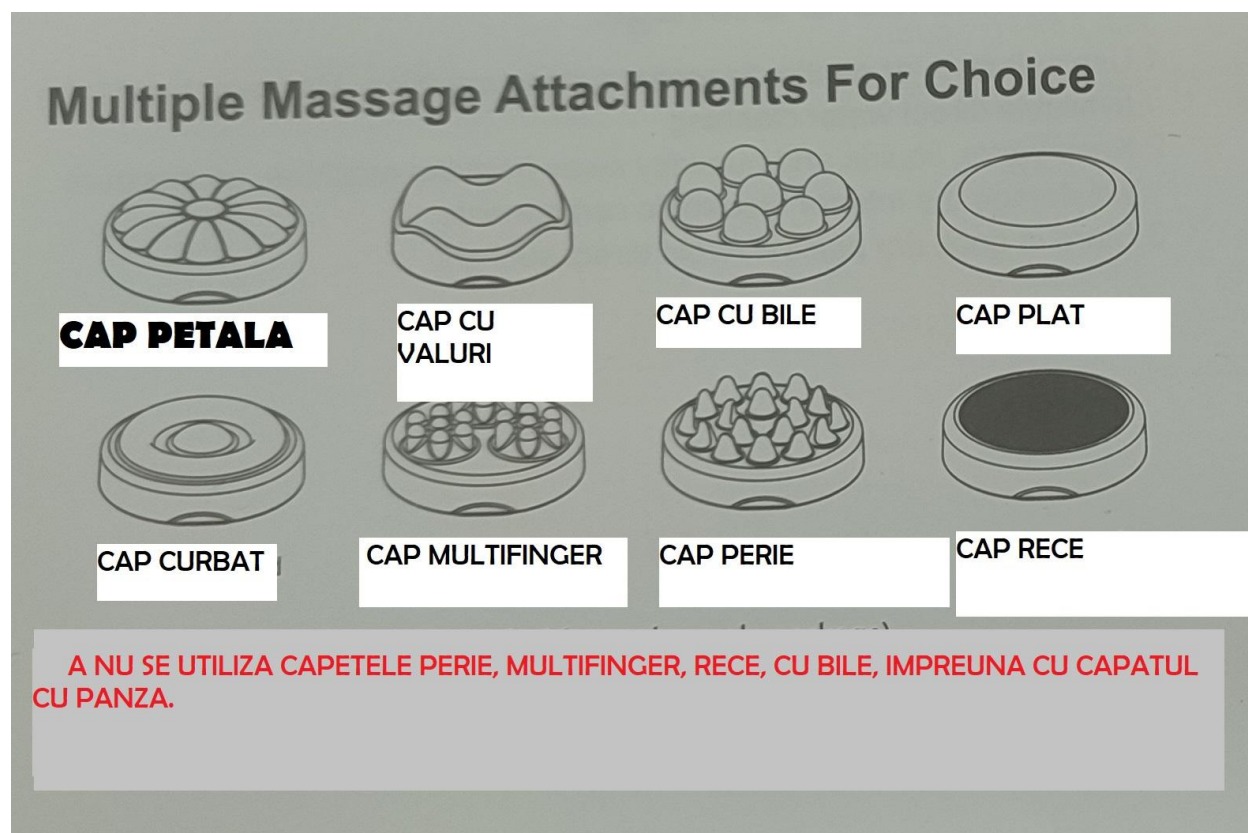

Întreținere și depozitare

1. Folosiți o cârpă moale sau un produs de curățare delicat, pentru a curăța mașina. Capetele de masaj se pot curăța direct sub apă.
2. Țineți apa, lichidele și umiditatea departe de mașină, deoarece umiditatea va deteriora componentele electronice interioare.
3. Depozitați în locuri răcoroase și uscate. Evitați lumina directă a soarelui.