

MANUAL DE UTILIZARE

Aparat de masaj pentru picioare



1. Instrucțiuni de siguranță
2. Garanție
3. Componentele produsului
4. Caracteristici și diagramă de utilizare
5. Setări
6. De operare
7. specificații
8. Depanare
9. Întreținere

Instrucțiuni de siguranță

- 1) Asigurați-vă că citiți manualul de utilizare în detaliu înainte de utilizare pentru a asigura siguranța și utilizarea corectă a produsului.
- 2) Utilizați produsul conform instrucțiunilor din acest manual.
- 3) După utilizare sau înainte de curățarea produsului, vă rugăm să deconectați aparatul de la curent.
- 4) Utilizați întotdeauna cu atenție funcția de încălzire pentru a evita defecțiuni grave.
- 5) Nu aplicați produsul pe pielea sensibilă sau pe părțile corpului cu circulație sanguină deficitară.
- 6) Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor cu tulburări fizice și psihice să utilizeze funcția de încălzire sau să opereze aparatul într-un mod necorespunzător, ceea ce poate fi periculos.

- 7) Pentru a preveni incendiul, șocul electric sau rănille cauzate de supraîncălzire, nu utilizați aparatul sub o pernă sau o pătură.
- 8) Nu acoperiți aparatul în timpul utilizării pentru a evita funcționarea defectuoasă sau deteriorarea cauzată de supraîncălzirea motorului.
- 9) Copiii, persoanele cu tulburări fizice și mentale și persoanele cu dizabilități ar trebui să fie supravegheate atunci când folosesc produsul.
- 10) Vă rugăm să încetați imediat utilizarea dacă vă simțiți inconfortabil.
- 11) Dacă cablurile de alimentare sau ștecherule sunt deteriorate, dacă produsul a fost scăpat sau deteriorat, nu utilizați acest produs și contactați centrul de service pentru inspecție și reparație.
- 12) Nu folosiți piese de schimb care nu sunt recomandate de producător.
- 13) Nu introduceți și nu aruncați obiecte în niciun orificiu al produsului.
- 14) Vă rugăm să opriți toate comenzile operaționale înainte de a deconecta produsul de la curent dacă doriți să întrerupeți alimentarea.
- 15) Acest produs nu poate fi utilizat pentru auto-diagnosticare sau tratament; vă rugăm să consultați un specialist medical dacă aveți nevoie de diagnostic sau tratament.

Utilizarea în medii specifice

- 1) Nu utilizați produsul într-un mediu umed sau cu praf pentru a evita defectarea acestuia.
- 2) Nu utilizați acest produs la temperaturi ambientale de peste 40°C.
- 3) Nu utilizați produsul în aer liber.
- 4) Nu utilizați produsul lângă un încălzitor electric sau în lumina directă a soarelui.

Contraindicații pentru utilizarea acestui produs:

1) Vă rugăm să vă consultați medicul înainte de utilizare dacă aveți următoarele situații:



- a) Primiți tratament medical sau simțiți disconfort fizic.
- b) Suferiți de hipertensiune arterială, boli de inimă, arterioscleroză cerebrală sau tromboză cerebrală.
- c) Suferiți de cancer.
- d) Sunteți însărcinată sau în perioada de alăptare.
- e) Suferiți de osteoporoză.
- f) Utilizați un stimulator cardiac sau alte dispozitive medicale implantabile.
- g) Suferiți de boli acute.
- h) Sunteți minor.

Butoane

- 1) Nu acționați butoanele cu mâinile ude.
- 2) Feriți butoanele de apă sau alte lichide.
- 3) Nu adormiți când utilizați produsul.

- 4) Nu utilizați acest produs în stare de ebrietate sau dacă vă simțiți inconfortabil.
- 5) Nu contactați direct suportul de masaj cu mâinile, articulațiile picioarelor, pieptul, genunchii și abdomenul.
- 6) Nu utilizați acest produs mai mult de treizeci de minute la rând.
- 7) Nu utilizați produsul dacă capacul din pânză a fost deteriorat.
- 8) Nu utilizați produsul cu o oră înainte și după masă pentru a evita efectele adverse.
- 9) Nu activați funcția de încălzire când produsul este utilizat la o temperatură scăzută a camerei. Se recomandă să ajustați treptat temperatura la un interval normal înainte de a activa încălzirea.
- 10) Dacă produsul este utilizat imediat după ce a fost transferat dintr-un mediu rece într-un mediu cald, acumularea de vapori de apă în interiorul produsului poate afecta funcționarea normală sau chiar poate provoca defecțiuni mecanice. Vă recomandăm să lăsați produsul la temperatura normală a camerei timp de o oră înainte de a începe să îl utilizați după transfer.

Componentele produsului

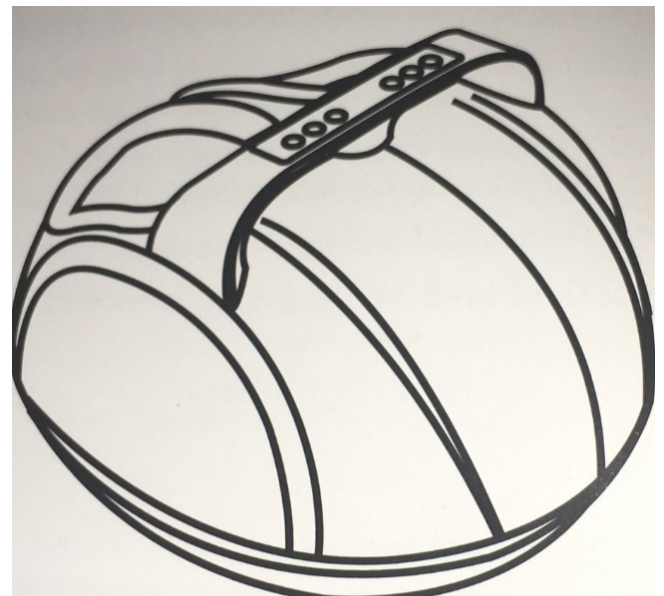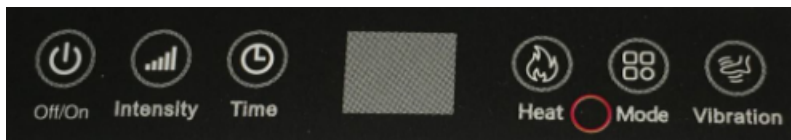

- Suprafața centrală: șase butoane independente - controlează setările și funcțiile produsului
- Pad de masaj central: Zgarietura-Acupresiune pe arcade cu incalzire
- Pad de masaj frontal: Framantare cu rola- Presupunere pe talpile din fata
- Pad de masaj din spate: Împingeți Frământare-Acupresiune pe călcâie
- Airbag interior-Presiunea aerului pe coppie
- Curatare husei din stofa detasabila si lavabila
- Partea de jos: Înfășurarea cablului - menține lucrurile ordonate

Caracteristici și diagramă de utilizare



Caracteristicile produsului

- 1) Design în formă de ou, la modă și frumos. Ușor și portabil.
- 2) Împingere, frământare, presopunctură, presiunea aerului și încălzire.
- 3) Pad de masaj care oferă masaje complete și presopunctură în profunzime. O combinație de o varietate de funcții, inclusiv zgărierea, frământarea cu role și curățarea meridianelor corpului și a zonelor de reacție ale piciorului.

4) Husă detașabilă și lavabilă, permițându-vă să păstrați curățenia în orice moment.

5) Înfășurare pentru cablu, aducând confortul în viața de zi cu zi.

Utilizați diagrama

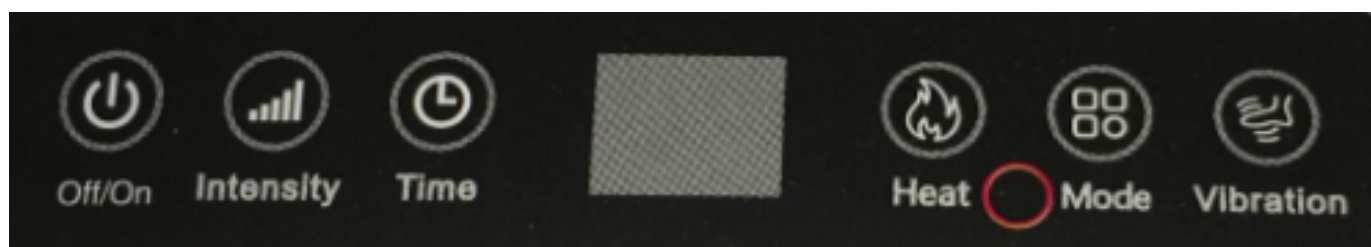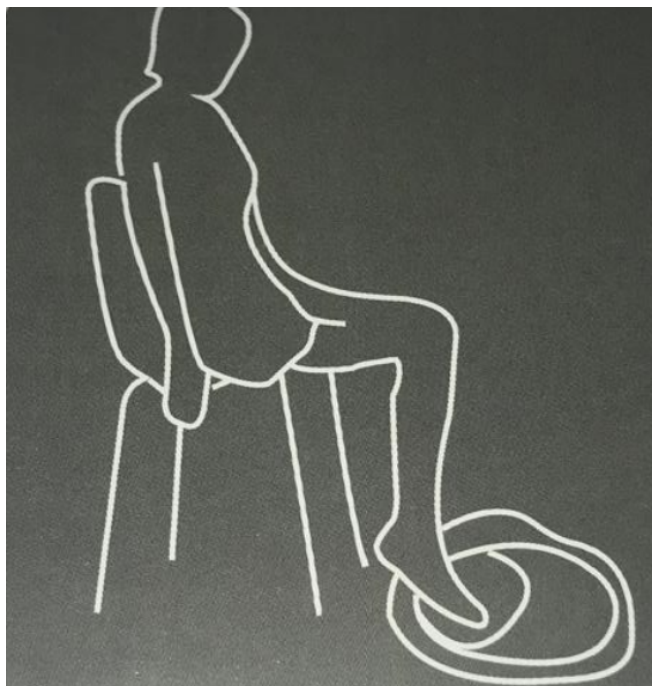

Off/On - Pentru a porni sau opri dispozitivul

Intensity - Pentru a controla nivelul presiunii aerului

Time - Reglați timpul/cronometrul

Heat - Apăsați butonul pentru a controla încălzirea


Mode - Pentru a comuta între modurile de masaj - Există 5 moduri de tipuri de masaj

Vibration - Pentru a comuta între cele trei niveluri de vibrație

Modul de operare

Așezați aparatul de masaj pentru picioare pe podea în fața unui scaun confortabil și conectați-l la priza de alimentare. Așezați-vă într-o poziție confortabilă.

- 1) Porniți unitatea prin activarea comutatorului de alimentare.
- 2) Setați intensitatea cu butonul Intensitate, de la L1 la L9. Intensitatea implicită este L5.
- 3) Setați timpul cu butonul Timp, care poate fi ajustat de la 5 la 30 de minute. Timpul implicit este de 15 minute.
- 4) Setați căldura pornit/oprit cu butonul de încălzire.
- 5) Setați modul prin butonul Mod. Există 5 moduri: P1-P5.
- 6) Setați vibrația cu butonul Vibrație. Există 3 niveluri: F1-F3. F0 este dezactivat.

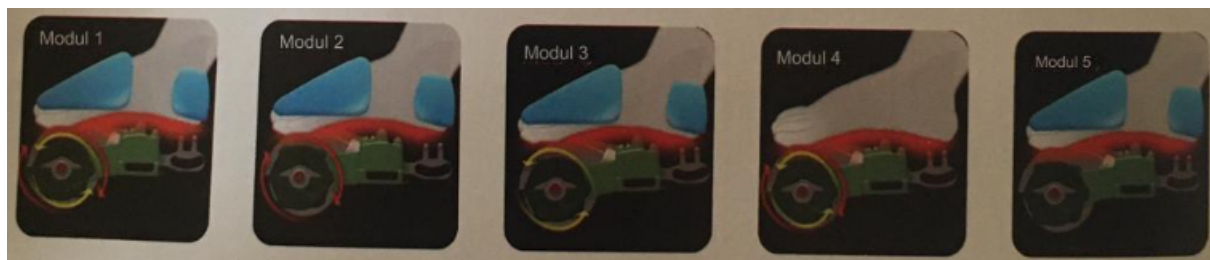

7) Opriți comutatorul de alimentare pentru a opri complet aparatul și deconectați-l de la priza de perete după utilizare.

Detalii tehnice

Voltaj 110V-230V

Putere 50W

Depanare

Vă rugăm să consultați următoarele sfaturi și soluții posibile dacă apar probleme în timpul utilizării acestui produs. Produsul poate fi returnat la centrul de service sau poate fi supus inspecției și reparațiilor de către tehnicieni autorizați.

Probleme cunoscute:

1) Nu functioneaza!

Cauze posibile:

- Dispozitivul nu este conectat la sursa de current
- Butonul de “Power” nu a fost apasat

Pași de depanare:

a) Conectați dispozitivul la sursa de alimentare, asigurați-vă că sursa de alimentare funcționează corect, dacă nu încercați să schimbați la o altă priză de perete.

b) Asigurați-vă că butonul de pornire a fost apăsat corect, asigurați-vă că butonul nu este blocat sau deteriorat.

2) Dintr-o dată nu mai funcționează!

Cauze posibile:

- Cablul de alimentare a fost deconectat
- Durata de operare a fost configurată pentru mai puțin de 15 minute
- Dispozitivul a început să se supraîncălzească și, prin urmare, a început să funcționeze defectuos.
- Presiunea de funcționare este atât de mare încât bilele de masaj nu se mai rotesc

Pași de depanare:

a) Verificați dacă dispozitivul nu a fost deconectat de la priza de perete

b) Reporniți dispozitivul sau deconectați și reconectați cablul de alimentare

c) Lăsați dispozitivul să se răcească după supraîncălzire și verificați dacă se supraîncălzește din nou, dacă da, contactați distribuitorul pentru înlocuirea în garanție sau pentru repararea dispozitivului

Întreținerea Dispozitivului

Depozitare

01. Produsul trebuie să fie plasat în cutia originală și depozitat în condiții de siguranță, într-un loc uscat, bine ventilat și răcoros atunci când nu este utilizat.

02. Nu răsuciți butonul de alimentare și cablul.

03. Nu agățați produsul de cablu.

04. Evitați zgârierea suprafeței produsului cu obiecte ascuțite.

05. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui sau la condiții de temperatură ridicată.

Curățenie

01. Asigurați-vă că butonul de pornire este oprit și deconectați cablul de alimentare înainte de curățare.

02. Utilizați o cârpă uscată pentru a curăța suprafața produsului.

03. Nu agățați produsul de cablu.

Notă

01. Nu utilizați detergenți corozivi, cum ar fi benzenul sau diluantul, pentru curățarea produsului.

Întreținere

01. Păstrați produsul curat și departe de condiții de umiditate ridicată.

02. Vă recomandăm să folosiți un capac de praf (neinclus în cutie) pentru a acoperi produsul, prevenind astfel acumularea de praf dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

