

MANUAL DE UTILIZARE

APARAT DE MODELARE CORPORALĂ 4 ÎN 1



Prefață

Vă mulțumim că ați ales produsele noastre!

Aparatul 4 în 1 de cavitație este echipat cu 4 capete de masaj diferite, un set complet de proceduri potrivite pentru toate tipurile de piele și zone ale corpului, pentru a răspunde nevoilor de îngrijire corporală: întinderea pielii, reducerea grăsimii, stimularea metabolismului etc. Dispune de ecran tactil color, ușor de utilizat. Se pot ajusta intensitatea, modul (frecvența de ieșire) și timpul (de obicei 15–20 minute, o dată la 2–3 zile), oferind o experiență confortabilă și fără durere. Crearea unui corp perfect îți aparține ție. Este potrivit pentru uz casnic, saloane de înfrumusețare și SPA-uri. De asemenea, poate fi un cadou ideal pentru o persoană dragă.

Vă recomandăm să aveți o alimentație echilibrată și să faceți mișcare în timpul utilizării acestui produs, pentru un efect mai rapid și mai vizibil — o soluție ideală pentru o pierdere în greutate sănătoasă.

Introducerea configurației

Butoane și interfețe



Funcția și principiul de funcționare al capetelor de masaj



1. Cap de cavitație 40 kHz

Folosește unde sonore concentrate de înaltă frecvență (40.000 Hz) pentru a penetra stratul adipos. Undele sonore produc un impact puternic asupra celulelor grase, determinând arderea calorilor,

eliminarea apei și a grăsimii. Celulele adipoase se micșorează sau se distrug, obținându-se astfel efectul de îndepărtare a grăsimii.

Efecte principale:

Stimulează metabolismul general sau local;

Întărește metabolismul corpului, ajutând la eliminarea reziduurilor și a apei;

Repară vergeturile;

Relaxează mușchii, ameliorează spasmele și durerile musculare;

Întărește pielea din zonele taliei, feselor, șoldurilor, picioarelor și abdomenului;

Reduce celulita și pielea cu aspect de „coajă de portocală”, relaxând țesuturile după sarcină.



2. Cap RF cu 4 poli pentru față

Funcții: dizolvă grăsimea, favorizează drenajul limfatic, întărește pielea, îmbunătățește elasticitatea.

Transmite energie RF direcționată în stratul adipos superficial, accelerând circulația sângelui și limfei, eliminând toxinele și stimulând sinteza de collagen.

Rezultatul: piele mai fermă, mai elastică și mai tânără.



3. Cap RF tripolar pentru față

Capul RF tripolar acționează asupra pielii prin încălzirea fibrelor de collagen la 45–65°C.

Fibrele se contractă imediat, iar pielea devine mai fermă.

Stimulează proliferarea celulelor dermice, crește grosimea pielii și densitatea acesteia.

Rezultate: reducerea ridurilor, estomparea cicatricilor, refacerea elasticității și a luciului pielii.



4. Mâner RF bipolar cu vacuum

Dizolvă grăsimea, stimulează drenajul limfatic, tonifică pielea și îmbunătățește elasticitatea.

Utilizează tehnologie cu turbină de înaltă viteză și presiune negativă, combinată cu microcipuri de control și role brevetate.

Stimulează țesuturile conjunctive, promovează metabolismul, ajutând la deplasarea pasivă a celulelor grase și la eliminarea toxinelor.

Îmbunătățește sistemul limfatic și eliminarea toxinelor de până la 4 ori mai eficient decât manual.
Rezultatul: piele mai elastică și mai luminoasă.

Panou de control

Pe ecranul tactil, selectați canalul RF corespunzător și nivelul de intensitate dorit (recomandat: nivel 3–6).

Apăsați „WORK” pentru a începe funcționarea.

Îngrijire și frumusețe

Folosiți sonda pentru a masa zona dorită în mișcări circulare, după aplicarea unei creme sau geluri pentru slăbit, timp de 30–40 minute.

Aceasta va stimula circulația sângelui și va accelera procesul de descompunere a grăsimilor.

Aspecte importante de reținut

Aplicați cremă sau gel de răcire pe piele înainte de tratament;

Mențineți contactul complet între sonda aparatului și piele;

Ajustați treptat intensitatea de la nivel scăzut la ridicat;

Nu utilizați aparatul în apropierea ochilor;

Folosiți capul de vacuum bipolar timp de 15–20 minute, masând ușor în sens circular.

Domenii de aplicare


1. Brațe, picioare, coapse, talie, abdomen și alte zone;
2. Țesut adipos persistent și condiții asociate;
3. Dureri articulare și musculare (ex. sciatică);
4. Stimularea exercițiilor mecanice aerobice ale pielii, reducerea celulitei, fermitate crescută;
5. Lifting facial și întărirea pielii, refacerea elasticității;
6. Activarea celulelor, producerea de colagen și fibre elastice, întinerirea pielii.

Instrucțiuni de operare


Pași de utilizare

1. Conectați mânerul la portul corespunzător, apoi introduceți cablul de alimentare în priză. Atenție: conectați mai întâi sonda de masaj înainte de a porni aparatul, pentru a evita șocurile electrice.
2. Apăsați butonul de pornire — se va aprinde indicatorul luminos și ecranul LCD.
3. Atingeți tasta ENTER de pe ecranul tactil pentru a intra în modul de operare și selectați funcția dorită. (Figurile 3–6 prezintă interfața celor patru funcții diferite.)

Exemplu: pentru funcția Cavitation 40K, apăsați butonul corespunzător. Pe ecran va apărea meniul de setare.

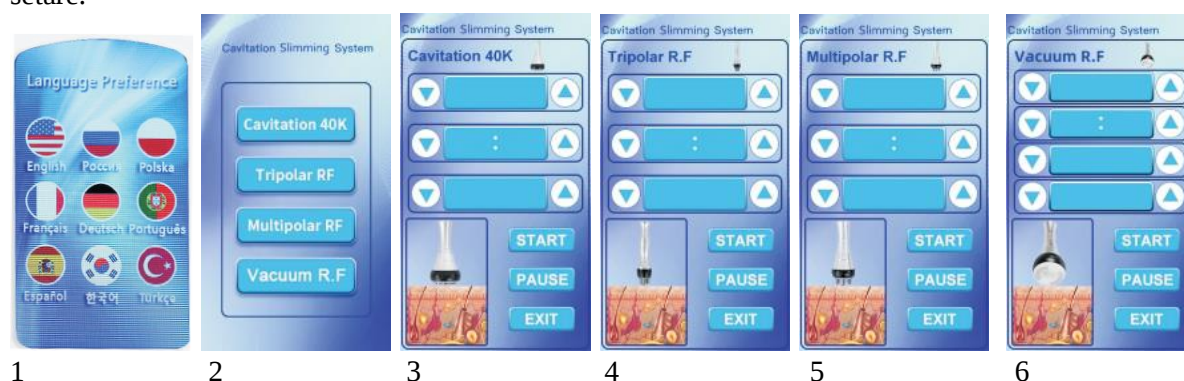

4. Ajustați modul, timpul de lucru și intensitatea, apoi apăsați butonul START pentru a începe. (Aceeași metodă se aplică și pentru celelalte funcții RF.)

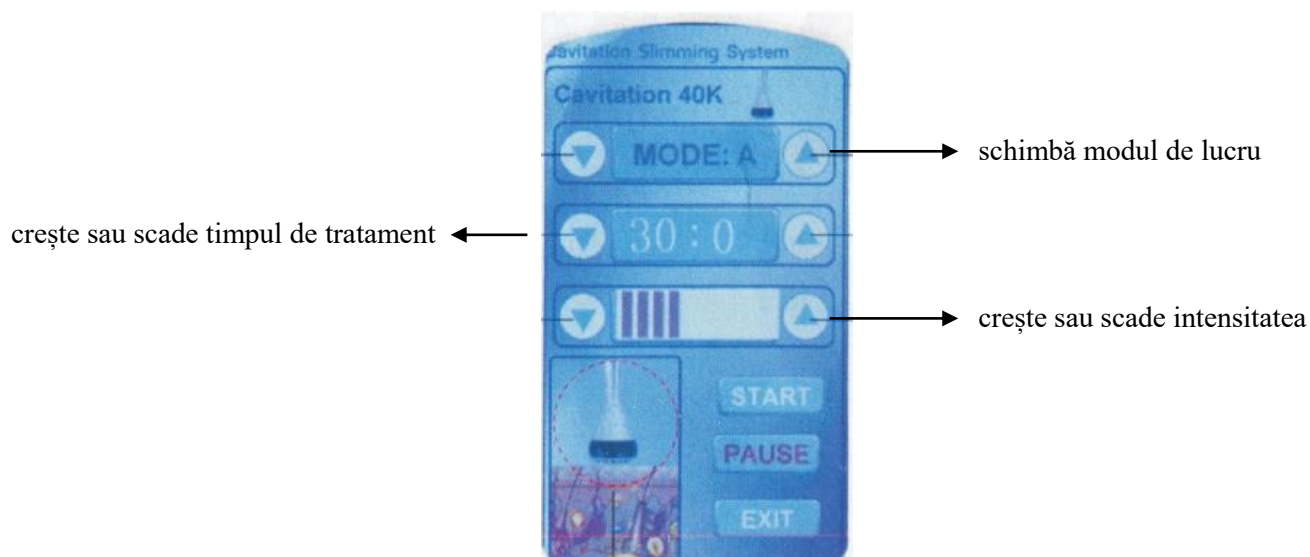

Instrucțiuni:

I. Setezi modul de lucru

II. Setezi durata tratamentului

III. Setezi nivelul de energie

IV. Dacă este selectat modul Vacuum RF, reglezi simultan puterea de absorbție și de eliberare a presiunii

V. După setarea parametrilor, apăsai START pentru a începe tratamentul

Atenție: Când setezi energia, începeți întotdeauna de la cea mai mică valoare și creșteți treptat în funcție de toleranța clientului.

5. După terminarea tratamentului, apăsai butonul **BACK** pentru a reveni la ecranul anterior, apoi oprești aparatul.

Descrierea funcțiilor principale



Cavitation 40K (Cap de cavitație 40 kHz)

Ajustare mod, timp, intensitate.

Capul emite unde ultrasonice de 40.000 Hz care acționează asupra grăsimii.



Multipolar RF (Cap RF multipolar pentru față)

Ajustare mod, timp, intensitate.

Reglarea energiei se indică prin aprinderea luminii roșii.



Tripolar RF (Cap RF tripolar pentru față)

Ajustare mod, timp, intensitate.

Lumina roșie indică reglarea energiei.



Vacuum RF (Mâner RF bipolar cu vacuum)

Reglaj simultan pentru puterea de aspirare și de eliberare.

Butonul de reglare a aerului: MIN – MAX pentru ajustarea vidului.

Reglarea energiei se indică prin aprinderea luminii roșii.

Metoda recomandată de utilizare a mânerului

Așezați aparatul pe o suprafață plană, pentru o bună circulație a aerului (nu se recomandă utilizarea pe o pătură).

Introduceți complet cablul mânerului în portul corespunzător.

Conectați capătul cablului la adaptorul de alimentare.

Aplicați 2–3 mm de gel pe zona de tratament, apoi tamponați ușor de 2–3 ori pentru absorbție și fixare.

După setarea nivelului de energie, efectuați tratamentul conform imaginilor.

Dacă mânerul nu alunecă ușor, aplicați din nou gel.

Nu țineți sonda nemișcată pe piele mai mult de 2–3 secunde.

Când sonda nu atinge corect zona dorită, indicatorul luminos devine verde.


În timpul utilizării, veți auzi un sunet ușor (semnal normal).

După terminarea tratamentului, îndepărtați gelul și curățați mânerul cu o cârpă moale.

După utilizare, aplicați o cremă hrănitoare sau un ser pentru hidratarea pielii.

Recomandare: folosiți cremă cu protecție solară dacă tratamentul a fost efectuat pe față sau pe zone expuse.

Metoda recomandată de operare

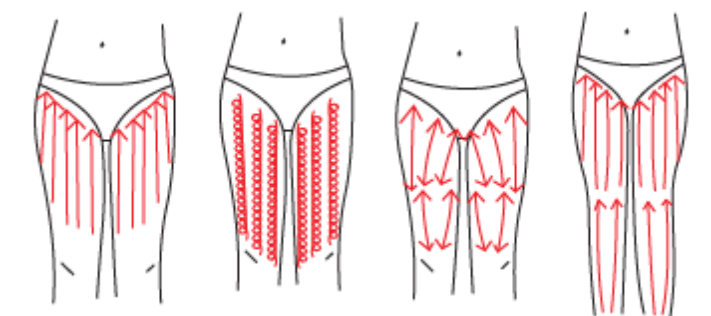


Coapse

De jos în sus, împingeți spre zona inghinală pentru drenaj limfatic;

Mișcările circulare în sens invers acelor de ceasornic, de jos în sus, ajută la descompunerea grăsimii;

Mișcările repetate înainte și înapoi ajută la eliminarea depunerilor grase;

De la genunchi către zona inghinală — ajută la îmbunătățirea formei și a conturului coapsei.

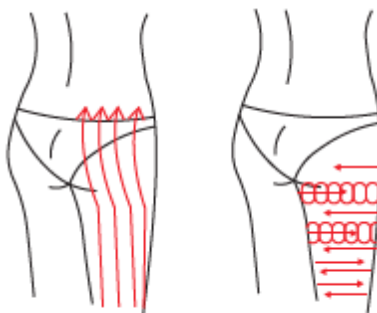


Fese

Masați de jos în sus, în direcția taliei, urmând traseul drenajului limfatic;

Efectuați mișcări circulare în sens invers acelor de ceasornic, de jos în sus, pentru a ridica și întări mușchii fesieri;

Mișcările de alunecare fermă întăresc țesutul muscular, oferind un contur bine definit și un aspect ridicat al feselor.

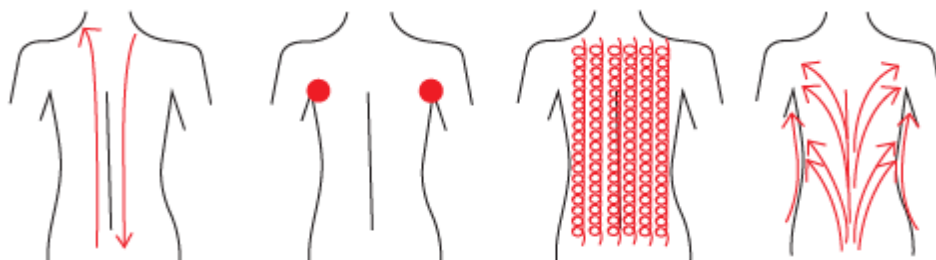

Spate

Mișcați înainte și înapoi de 2–3 ori pe aceeași zonă;

Masați circular, în sens invers acelor de ceasornic, în direcția ganglionilor limfatici;

Mișcările circulare de sus în jos și invers ajută la descompunerea depozitelor de grăsime;

Tehnicile de drenaj limfatic ajută la eliminarea toxinelor și la îmbunătățirea formei spatelui.




Brațe

De la cot spre axilă, efectuați drenaj limfatic;

Mișcări circulare pentru stimularea ganglionilor limfatici;

Mișcări circulare inverse sau de împingere înainte și înapoi pentru descompunerea grăsimii;


Tonificați pielea între cot și axilă.

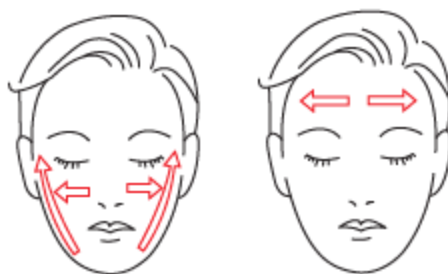

Față

Aplicați aparatul pe față și folosiți capul tripolar RF din partea de jos spre partea superioară a feței, pentru a ridica și întinde pielea — timp recomandat: 5 minute;

Masați uniform fața, urmând direcția săgeților din imagine, folosind capul RF tripolar — timp recomandat: 5–8 minute.

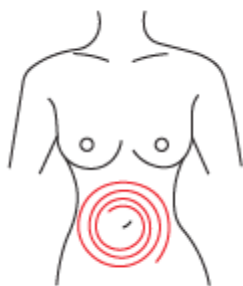

Abdomen

În jurul buricului, faceți mișcări circulare de la mic la mare, în sensul acelor de ceasornic — ajută la stimularea tranzitului intestinal;

Mișcări circulare de la mic la mare, în sens invers acelor de ceasornic, apăsând ușor în jos.

Întreținere

După fiecare utilizare, se recomandă curățarea suprafeței aparatului. Înainte de curățare, opriți alimentarea și scoateți ștecherul din priză.

Dacă apar pete persistente, ștergeți aparatul cu un burete sau o cârpă moale umezită într-o soluție neutră diluată.

Nu folosiți substanțe alcaline puternice, alcool, uleiuri volatile sau soluții pentru îndepărtarea luciului. Acest aparat nu este rezistent la apă — nu îl introduceți în apă și nu spălați unitatea principală sau adaptorul de alimentare.

Notă: Pe măsură ce produsul este îmbunătățit periodic, modelul din manual poate fi diferit de produsul real.

Avertisment

Nu este potrivit pentru următoarele persoane:

Persoane cu răni deschise — utilizarea pe zone afectate este interzisă;

Persoane care suferă de boli de piele sau epilepsie;

Persoane cu boli cardiace (ex. aritmii), în special cele cu stimulator cardiac;

Pacienți cu cancer — utilizarea este interzisă;

Persoane cu boli cardiace acute sau infecții respiratorii;

Femei însărcinate, care alăptează sau aflate la menstruație;

Persoane cu boli grave — ulcer gastric, hipertensiune, diabet, probleme stomacale severe, operație abdominală recentă (< 3 luni);

Persoane cu implanturi metalice sau din silicon;

Sonda trebuie ținută perpendicular pe piele (90°) — altfel poate apărea disconfort;

Începeți tratamentul cu sonda perpendiculară pe piele, reglați energia la nivel minim și creșteți treptat în funcție de toleranța clientului.

Atenționări

1. Curățați mai întâi pielea, apoi folosiți un gel special sau uleiuri esențiale pentru slăbit;

2. Trebuie folosit un mediu de tratament pe bază de apă (cum ar fi uleiuri esențiale pentru slăbit etc.), altfel există o anumită pierdere a eficienței aparatului;

3. Capul de operare nu trebuie ținut prea mult timp într-un singur loc, pentru a evita zonele osoase;

4. Nu folosiți produse dezinfectante puternice; se recomandă utilizarea unui prosop umed sau a bumbacului;

5. Operatorul și persoana tratată trebuie să îndepărteze orice obiect metalic;

6. Aparatul se poate folosi continuu timp de 1 oră, apoi se face o pauză de 10 minute înainte de reluare;

7. Unii utilizatori pot simți un ușor țiuit în urechi în timpul tratamentului cu capul de cavitație — acest fenomen este normal, deoarece undele sonore au o frecvență mai mare decât cea perceptibilă de om.

Date tehnice

Nume produs	Aparat de modelare corporală
Dimensiune ecran tactil	11 CM
Frecvență	40 kHz
Material principal	ABS
Alimentare	100V – 240V
Ieșire	24V – 5A

Pachetul include



Aparatul principal Tavă suport 2 stâlpi de susținere Cablu de alimentare Adaptor de curent