


MANUAL DE UTILIZARE


Aparat de slăbire 80K cu ultrasunete



Denumirea componentelor

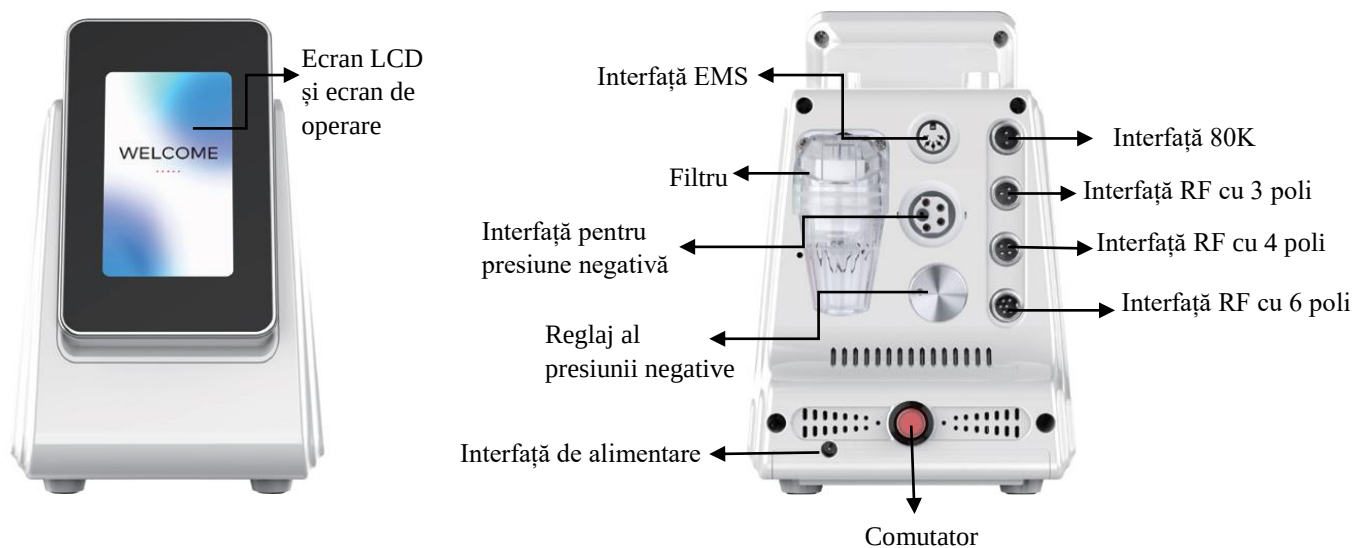

Imagine	Denumire cap de lucru	Funcție / Utilizare
	Cap RF cu 3 poli (3 RF Head)	Pentru lifting facial, reducerea ridurilor fine și stimularea colagenului în zona feței.
	Cap RF cu 4 poli (4 RF Head)	Pentru tonifierea pielii și îmbunătățirea elasticității pe zone medii (gât, brațe).
	Cap RF cu 6 poli (6 RF Head)	Pentru tratamente corporale, reducerea celulitei și fermitatea pielii.

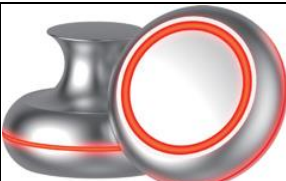Imagine	Denumire cap de lucru	Funcție / Utilizare
	Cap de masaj cu presiune negativă (Negative Pressure Massage Head)	Utilizează vacuumul pentru drenaj limfatic, remodelare corporală și relaxarea mușchilor.
	Cap 80K pentru arderea grăsimilor (80K Fat Burn Head)	Folosește ultrasunete de 80 kHz pentru a sparge depozitele de grăsime și a reduce stratul adipos.
	Mâner EMS (EMS Handle)	Stimulează mușchii prin impulsuri electrice, îmbunătățind tonusul și fermitatea corporală.

Funcția diferitelor capete de lucru

Conectați capul de lucru la mufa corespunzătoare și introduceți cablul de alimentare.

Apăsați butonul de pornire — indicatorul luminos și ecranul LCD se vor aprinde.

Alegeți funcția dorită.

Atingeți butonul 80K pentru a afișa interfața (figura 2).

Reglați modul de lucru, timpul de funcționare și intensitatea dorită, apoi apăsați butonul „▶” pentru a porni capul 80K pentru arderea grăsimilor.

Metoda de selectare a funcțiilor pentru celelalte capete RF este aceeași.

După utilizare, apăsați butonul „⏏” pentru a reveni la interfața afișată în Figura 1, apoi opriți aparatul prin apăsarea butonului de alimentare.



Cap RF cu 3 poli – Potrivit pentru nivelul de energie 1–2

Utilizare: pentru față și zona ochilor

La aplicarea pe piele, capul RF cu 3 poli ajută la fermitatea și tonifierea pielii, reducând ridurile fine.

Îmbunătățește circulația în zona ochilor, reduce porii și umflăturile (pungile de sub ochi).

Elimină ridurile, cearcănele și pungile de sub ochi.

Îmbunătățește textura pielii, elimină pielea lăsată și redă fermitatea.
Reîmprospătează pielea și îmbunătățește conturul ochilor.



Cap RF cu 4 poli – Potrivit pentru nivelul de energie 2–3

Utilizare: pentru față și gât

Conferă fermitate pielii, îmbunătățește elasticitatea și ajută la eliminarea ridurilor faciale.

Are efect de lifting și strângere a pielii, reduce umflăturile faciale și roșeața, ameliorează oboseala ochilor, elimină cearcănele și pungile de sub ochi.

Îmbunătățește calitatea generală a pielii.



Cap RF cu 6 poli – Potrivit pentru nivelul de energie 2–5

Utilizare: pentru spate, talie, coapse și gambe

Ajută la tonifierea taliei, fermitatea pielii și remodelarea corporală.

Înmoaie musculatura brațelor și coapselor, oferă un masaj complet al corpului și ajută la întărirea pielii și mușchilor din aceste zone.

Ideal pentru tratamente de fermitate și conturare corporală.



Cap de masaj cu presiune negativă

Întreținerea corpului

Ajustarea diversificată a nivelului de intensitate permite o utilizare confortabilă și eficientă.

Îmbunătățește textura pielii prin stimularea regenerării collagenului și a elasticității.

Reduce lăsarea pielii cauzată de grăsime și îmbătrânire, ajută la eliminarea toxinelor și deșeurilor metabolice din organism și stimulează metabolismul.

Funcția de masaj cu presiune negativă favorizează reducerea volumului celulelor adipoase.

Prin combinarea vacuumului cu radiofrecvența multipolară, energia RF pătrunde mai adânc în țesuturile pielii, crescând eficiența tratamentului.

În același timp, absorbția generată de presiunea negativă îmbunătățește circulația sângelui și metabolismul, relaxând mușchii și reducând senzația de oboseală musculară.



Funcția diferitelor capete de lucru

Cap 80K pentru arderea grăsimilor (80K Fat Burn Head)

Utilizare: pentru remodelare corporală

Dizolvă grăsimea, detoxifică sistemul limfatic, tonifică pielea și îmbunătățește elasticitatea acesteia.

Acționează direct asupra stratului adipos, prin ieșirea direcționată a energiei RF, accelerând mișcarea celulelor adipoase pentru a genera căldură.

Elimină excesul de grăsime și toxinele din organism prin glandele sudoripare, sistemul digestiv și circulația limfatică.

Rezultatul este reducerea depozitelor de grăsime și remodelarea vizibilă a corpului.



Mâner EMS (EMS Head / Handle)

Utilizare: pentru remodelare corporală


Tehnologie non-invazivă de slăbire care arde grăsimile în timp ce stimulează mușchii, similar cu efectuarea a 20.000 de abdomene sau genuflexiuni în doar 30 de minute.

Se recomandă 4-6 ședințe la intervale de 2-3 săptămâni.

Tratamentul determină reducerea grăsimii și creșterea masei musculare.

Zonele de tratament includ abdomenul, fesele, brațele și coapsele.


Oferă o procedură sigură și confortabilă, cu rezultate vizibile în tonifierea și modelarea corpului.

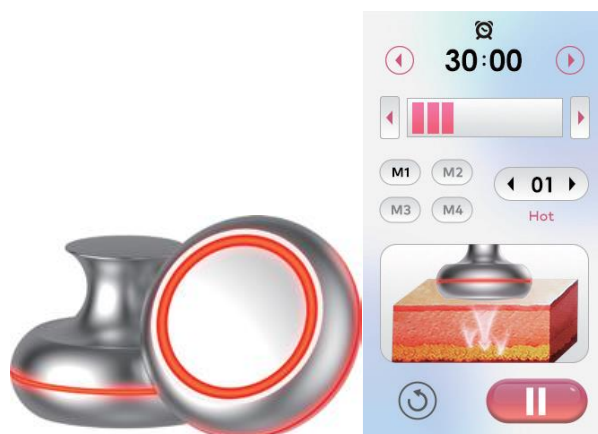

Instrucțiuni de utilizare


Coapse (Thigh)

Masați de jos în sus, împingând spre zona inghinală pentru a stimula drenajul limfatic.
 Mișcările circulare în sens antiorar, de jos în sus, ajută la descompunerea grăsimilor.
 Deplasați capul aparatului înainte și înapoi pentru a descompune depunerile de grăsime.
 Trageți de la genunchi spre zona inghinală pentru a îmbunătăți forma și conturul coapsei.

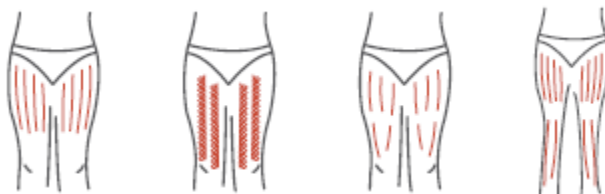


Șolduri (Hips)

Masați în direcția taliei, urmând traseul drenajului limfatic.
 Efectuați mișcări circulare antiorare de jos în sus, deplasându-vă înainte și înapoi.
 În funcție de textura mușchiului, glisați aparatul pentru a compacta pielea, făcând zona fesieră mai fermă și mai tonifiată, conturând un aspect armonios.

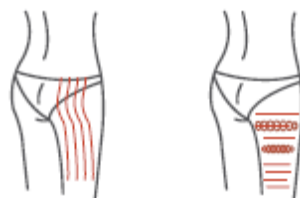

Spate (Back)

Mutați capul aparatului înainte și înapoi de 2–3 ori.
 Efectuați mișcări circulare în sens antiorar pentru a stimula ganglionii limfatici.
 Pe zona spatelui, rotiți în sens antiorar și deplasați aparatul în sus și în jos pentru a ajuta la descompunerea grăsimilor.
 Folosiți tehnica de drenaj limfatic pentru a direcționa toxinele către ganglionii limfatici, contribuind astfel la îmbunătățirea conturului spatelui.

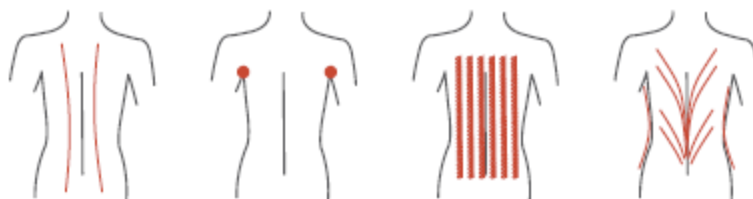

Brațe (Arm)

De la interiorul cotului spre axilă, efectuați mișcări pentru drenaj limfatic.

Stimulați ganglionii limfatici prin mișcări circulare.

Descompuneți grăsimea în exces rotind capul aparatului în sens antiorar sau deplasându-l înainte și înapoi.

Tonificați pielea de la cot până la axilă pentru un aspect ferm și uniform.



Față (Face)

Aplicați uniform produsul cosmetic pe față. Utilizați capul RF pentru față și lucrați de jos în sus, pentru a ridica trăsăturile și a conferi fermitate pielii. Se recomandă o durată de utilizare de aproximativ 5 minute.


Aplicați din nou produsul uniform pe față, utilizați capul RF urmând direcția indicată de săgeți. Se recomandă utilizarea timp de 5–8 minute pentru rezultate optime.



Abdomen (Abdomen)

În jurul buricului, efectuați mișcări circulare de la mic la mare, în sens orar, pentru a stimula peristaltismul intestinului gros.

Deplasați capul aparatului de la cercul mic spre cercul mare, rotind în sens antiorar, pentru a modela zona și a activa circulația.

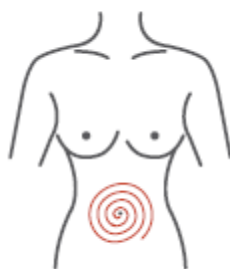

Sfaturi utile pentru utilizare

1. Nu utilizați aparatul pe pielea uscată sau deteriorată, deoarece poate provoca arsuri. Asigurați-vă că aplicați o cremă sau un ulei pe piele înainte de utilizare.
2. În timpul utilizării, trebuie aplicat un mediu apos (uleiuri esențiale, creme etc.); altfel, aparatul se poate deteriora. Nu utilizați aparatul pe aceeași zonă pentru perioade lungi și evitați zonele cu oase proeminente.
3. Asigurați-vă că sonda este corect instalată înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare.
4. Nu înlocuiți sonda atunci când aparatul este conectat la alimentare sau se află în procesul de încărcare.
5. Îndepărtați bijuteriile metalice înainte de a utiliza aparatul.
6. După fiecare oră de utilizare, opriți aparatul și lăsați-l să se odihnească timp de aproximativ 10 minute.

7. După utilizare, opriți alimentarea și curățați sonda cu o lavetă uscată pentru a o menține în stare bună pentru următoarea utilizare.
8. Curățați sonda după fiecare ședință, folosind o lavetă uscată — nu utilizați apă.
9. După tratament, curățați pielea și aplicați o cremă sau un ulei hidratant la 10 minute după sesiune.
10. În timpul utilizării capului 80K, unele persoane pot experimenta ușoare zgomote în urechi (tinitus). Acest fenomen este normal, deoarece undele sonore generate depășesc intervalul audibil al urechii umane.